


СОГЛАСОВАНО

Руководитель (заместитель)
ИЛЦ ФБУН «ГНЦ прикладной
микробиологии и биотехнологии»


М.В. Храмов
« 5 » октября 2022 г.

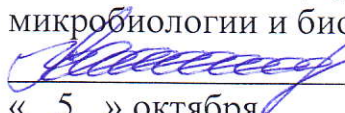

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «АЛДЕЗ»


Д.В. Янушкевич
« 5 » октября 2022 г.



ИНСТРУКЦИЯ № 02/22

**по применению дезинфицирующего средства с моющим действием
«АБСОЛЮЦИД лайт»**

(ООО «АЛДЕЗ», Россия)

Москва, 2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 02/22
по применению дезинфицирующего средства с моющим действием «АБСОЛЮЦИД лайт»
(производства фирмы ООО «АЛДЕЗ», Россия)

Инструкция разработана Федеральным бюджетным учреждением науки «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» (ФБУН «ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии»); ООО «АЛДЕЗ», Россия.

Авторы: Герасимов В.Н., Гайтрафимова А.Р., Быстрова Е.В., Васильева Е.Ю., Маринина Н.Н., Тищенко И.В. (ФБУН «ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии»); Янушкевич Д.В., Успенская Л.А. (ООО «АЛДЕЗ»).

Инструкция предназначена для персонала и руководителей медицинских, лечебно-профилактических организаций и учреждений здравоохранения всех форм собственности и ведомственной подчиненности, в том числе акушерско-гинекологического профиля, включая отделения неонатологии, родильных стационаров, отделений экстракорпорального оплодотворения, палаты интенсивной терапии, стоматологических, офтальмологических, соматических и физиотерапевтических отделений, интенсивной терапии и реанимации, хирургических, кожно-венерологических, детских отделений, отделения травматологии, ожоговых центров, центров по трансплантации органов, перевязочных и смотровых кабинетов, кабинетов амбулаторного приема, медицинских многопрофильных центров, клинических, диагностических, бактериологических, вирусологических, микологических, иммунологических, паразитологических, ПЦР и других лабораторий, противотуберкулезных, патологоанатомических отделений, судмедэкспертизы, моргов, для обработки автокатафалков, кожно-венерологических и инфекционных отделений, изоляторов и боксов, отделений переливания крови, детских и взрослых поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, станций скорой медицинской помощи и т.п.; в медицинских кабинетах и медпунктах различных учреждений; на санитарном транспорте всех видов, в том числе в условиях транспортировки в машинах скорой помощи, а также на других видах транспорта, включая транспорт для перевозки пищевых продуктов и продовольственного сырья; в инфекционных очагах, в зонах чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; персонала учреждений социального обеспечения (дома престарелых, инвалидов и др.), санпропускников, пенитенциарных и военных учреждений; служащих учреждений МО, ГО, МВД и МЧС; в медсанчастях, медпунктах, работников детских дошкольных, школьных учреждений, административных объектов; объектов коммунально-бытовой сферы (гостиницы, общежития, бани, сауны, парикмахерские и косметические салоны, солярии и др.), общественного питания, торговли, пищеблоков ЛПУ, пищевой и перерабатывающей промышленности, учреждений образования, культуры, отдыха и спорта, персонала объектов санаторно-курортного хозяйства, химической, фармацевтической и биотехнологической промышленности по производству стерильных и нестерильных лекарственных средств в помещениях классов чистоты А, В, С и D, аптек и аптечных организаций; на объектах водоканала и энергосети; населением в быту; для работников дезинфекционных станций и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Дезинфицирующее средство с моющим действием «АБСОЛЮЦИД лайт» представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до желтого цвета со слабым специфическим запахом и/или запахом отдушки.

В качестве действующих веществ содержит: смесь четвертичных аммонийных солей алкилдиметилбензиламмония хлорида и алкилдиметилэтилбензиламмония хлорида - 3 % и полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (ПГМГ) - 1%, с добавлением антикоррозионных, комплексообразующих веществ. Кроме того, в состав средства входят неионогенные поверхностно активные вещества, обеспечивающих моющее и обезжиривающее действие. pH 1% раствора средства - $7,8 \pm 1,0$. Не требуется фенолфталеиновой пробы.

Срок годности средства - 7 лет в плотно закрытой упаковке изготовителя, рабочих растворов – 50 суток при условии их хранения в закрытой стеклянной, пластмассовой или эмалированной (без повреждения эмали) ёмкости при комнатной температуре в местах, защищённых от прямых солнечных лучей. После вскрытия упаковки срок годности средства 1 год при комнатной температуре в защищённом от прямых солнечных лучей и нагрева месте.

Средство обладает пролонгированным действием не менее 24 часов.

Для предотвращения пенообразования к рабочему раствору перед использованием при

необходимости (при обработке слюноотсасывающих систем стоматологических установок, для стирки белья, совмещенной с дезинфекцией, в стиральных машинах всех типов) может быть добавлен пеногаситель в количестве 2- 3 капли на 1 л рабочего раствора (поставляется отдельно во флаконе-капельнице).

Рабочие растворы средства могут использоваться для пропитывания сухих салфеток АБСОЛЮСЕПТ СССР.

1.2. Средство «АБСОЛЮЦИД лайт» обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей туберкулеза (тестировано на *Mycobacterium terrae*), возбудителей кишечных инфекций (тестировано на *Escherichia coli* 1257, *Salmonella Typhimurium* 79), внутрибольничных инфекций (тестировано на *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853, *Staphylococcus aureus* 906), анаэробных инфекций (*Clostridium perfringens* ATCC 13124), возбудителей особо опасных инфекций - холеры (тестировано на *Vibrio cholerae* 01/0139 P-9741) чумы (тестировано на *Yersinia pestis* EV НИИЭГ), туляремии (тестировано на *Francisella tularensis* 15/10) и легионеллеза (тестировано на *Legionella micdadei* NCTC 11371); вирусов (тестировано на вирусе полиомиелита I типа, что обеспечивает полное вирулицидное действие, включая острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, ВИЧ, вирусы гриппа, в т.ч. штаммов H5N1 и H1N1, парагриппа, коронавирусы (в том числе Covid- 2019, Омикрон), вирус атипичной пневмонии, аденовирус, вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов всех видов, вкл. А, В, С); фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида (тестировано на *Candida albicans* ATCC 10231), Дерматофитии и Трихофитон (тестировано на *Trichophyton mentagrophytes* var. *Gypseum* F-1207, плесневых грибов (тестировано на *Aspergillus niger* ATCC 16404); овицидной эффективностью в отношении яиц и личинок энтеробиоза.

Средство обладает выраженными моющими, обезжиривающими и дезодорирующими свойствами, удаляет типичные бытовые и промышленные загрязнения (пятна и налеты жира, масла, сажи, белковых отложений и многих других трудноудаляемых веществ) с пористых и непористых поверхностей из любых материалов (стекло, зеркала, металлы, керамика, ковры, кожа, хромированные изделия, бетон, кафель, резина, пластик, винил, фарфор, фаянс и другие, в том числе пористые). Средство полностью нейтрализует неприятные запахи (в т.ч. запах мочи, гнилостные запахи, запах плесени посторонние запахи в помещениях с лежащими больными, запахи домашних животных, табака, пищи и пищевых отходов (мусорные баки). Средство смывает выделения кожных, сальных и потовых желез, отмершие клетки эпидермиса, остатки косметических средств с поверхностей из различных материалов.

Растворы средства в рабочих концентрациях не вызывают повреждения обрабатываемых поверхностей предметов, медицинских приборов, кузетов для недоношенных детей, кроватей, покрытий мебели, стен, полов, санитарно-технического оборудования из коррозионностойких металлов, в том числе полимерных материалов, резины, кафеля, деревянных поверхностей с лакокрасочным покрытием, линолеума, стекла, керамики, фарфора и фаянса, не оказывает отбеливающего действия на цветные ткани, не повреждает изделия из различных металлов, включая, углеродистые стали и сплавы, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов, не вызывает помутнения оптики и разрушения клеевых соединений.

Смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется.

Средство не требует обязательной ротации.

Обработку любых объектов способами протирания, погружения и замачивания в помещениях растворами средства можно проводить в присутствии пациентов.

Эффективно разрушает биопленки и препятствует их образованию.

При высыхании не оставляет разводов, не нарушает защитных покрытий на поверхности.

Средство не совместимо с мылами, анионными ПАВ, синтетическими моющими средствами.

Допускается использование моющих средств и добавок на основе неионогенных ПАВ.

Рабочие растворы негорючи, пожаро и взрывобезопасны.

Средство полностью биоразлагаемо и экологически безопасно.

Сохраняет свои свойства после заморозания и последующего оттаивания.

1.3. Средство «АБСОЛЮЦИД лайт» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, к 4 классу мало опасных веществ при нанесении на кожу, к 4 классу мало опасных веществ при ингаляционном воздействии в виде паров по степени летучести (C20); к 4 классу малотоксичных веществ при введении в брюшину согласно классификации К.К.Сидорова. Средство оказывает слабое раздражающее действие при контакте с кожей и не выраженное раздражающее действие на слизистые оболочки глаза. Средство не обладает кожно-резорбтивной активностью, мутагенным, канцерогенным, эмбриотоксическим и тератогенным действием.

ПДК в воздухе рабочей зоны:

Алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 1 мг/м³ (аэрозоль, с пометкой «Требуется защита кожи и глаз»);

Алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид - 1 мг/м³ (аэрозоль, с пометкой «Требуется защита кожи

и глаз);

Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид – 2 мг/м³ (аэрозоль).

1.4. Средство «АБСОЛЮЦИД лайт» предназначено для:

- дезинфекции, мытья и дезодорирования поверхностей в помещениях (полы, стены, двери, подоконники и т.д.), жесткой и мягкой мебели, напольных покрытий и обивочных тканей, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования (включая ванны и душевые кабины из акрила: лечебные, грязевые, минеральные, гидромассажные ванны для бесконтактного массажа, гидро-, бальнеотерапии, СПА-капсул и т.п.), белья (нательного, постельного, спецодежды), посуды (в том числе одноразовой, аптечной и лабораторной), предметов для мытья посуды, кухонного оборудования и инвентаря (кастрюли, сковородки, мясорубки и др.), резиновых и полипропиленовых ковриков, уборочного инвентаря и материала (щётки, ерши, ветошь, МОПы и т. д.), игрушек, спортивного инвентаря, предметов ухода за больными (грелки, подкладные клеёнки, термометры, банки, наконечники для клизм, пузыри для льда, судна и др.), предметов личной гигиены в ЛПУ и ЛПО разного профиля (включая клинические, диагностические и бактериологические, вирусологические, ПЦР и другие лаборатории, отделения неонатологии, ЭКО, роддома, палаты новорожденных, детские отделения, отделения интенсивной терапии и реанимации, стоматологические клиники и отделения, эндоскопические и колоноскопические отделения, травматологии, ожоговые, трансплантации костного мозга, гематологии, кожно-венерологические диспансеры и пр.), пунктах и станциях переливания и забора крови (поверхности в помещениях), в детских дошкольных, школьных и других общеобразовательных и оздоровительных учреждениях и организациях, пенитенциарных учреждениях, коммунальных учреждениях, в инфекционных очагах - при проведении текущей, заключительной и профилактической дезинфекции;
- дезинфекции медицинского оборудования (в т.ч. куветы и приспособления к ним; датчики УЗИ, реанимационные и пеленальные столики, оптические устройства, барокамеры и иное оборудование для оксигенотерапии, бактерицидные камеры для хранения стерильных инструментов и др.);
- дезинфекции медицинских отходов – медицинских изделий однократного применения (в том числе лабораторной посуды), перевязочного материала, белья одноразового применения и т.д. перед их утилизацией в ЛПУ, а также пищевых отходов;
- дезинфекции медицинских отходов из текстильных и других материалов (перевязочный материал, ватно-марлевые салфетки, тампоны, бинты, наклейки, шапочки, бельё одноразовое, медицинские изделия однократного применения, ампулы и шприцы после проведения вакцинации и т. д.) перед их утилизацией в ЛПУ;
- дезинфекции биологических выделений/материалов (кровь, сыворотка, сперма, эритроцитарная масса, моча, фекалии, рвотные массы, ликвор, околоплодные воды и пр.), в том числе в клинических, микробиологических и других лабораториях (вакцины, культуры, штаммы, вирусологический материал и т.п.); посуды из-под выделений больного; для дезинфекции крови в сгустках, донорской крови и препаратов крови с истекшим сроком годности, медицинских пиявок после проведения гирудотерапии;
- дезинфекции стоматологических материалов: артикуляторов, стоматологических оттисков из альгинатных, силиконовых материалов, полиэфирной смолы, зубопротезных заготовок из металлов, керамики, пластмасс и других материалов, отсасывающих систем стоматологических установок, слюноотсосов и плевательниц;
- дезинфекции медицинских изделий, включая хирургические и стоматологические инструменты (в том числе вращающиеся - боры зубные твердосплавные, наконечники, головки стоматологические алмазные, дрель-боры зубные, каналонакопители, фрезы и т.п.), жёсткие и гибкие эндоскопы, инструменты к эндоскопам;
- дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, медицинских изделий, включая хирургические и стоматологические инструменты (в том числе вращающиеся - боры зубные твердосплавные, наконечники, головки стоматологические алмазные, дрель-боры зубные, каналонакопители, фрезы, в том числе вращающиеся, жёсткие и гибкие эндоскопы, инструменты к эндоскопам) ручным, механизированным в моечно-дезинфицирующих машинах, в ультразвуковых, а также в специализированных установках отечественного и импортного производства, тип УДЭ-1-«КРОНТ», УДЭ-21-«КРОНТ» И ЭНДОДЕЗ - «КРОНТ» и др.) способами;
- дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной или окончательной (перед дезинфекцией высокого уровня /ДВУ/) очисткой, гибких и жестких эндоскопов ручным и механизированным в моечно-дезинфицирующих машинах, в ультразвуковых, а также в специализированных установках отечественного и импортного производства, тип УДЭ-1-«КРОНТ», УДЭ-21-«КРОНТ» И ЭНДОДЕЗ - «КРОНТ» и др.) способами;
- дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, инструментов, используемых для маникюра, педикюра, чистки лица и других косметических процедур, расчесок, щёток, ножниц для стрижки волос и бритвенных принадлежностей в парикмахерских, салонах красоты ручным и механизированным в моечно-дезинфицирующих машинах, в ультразвуковых, а также в специализированных установках отечественного и импортного производства, тип УДЭ-1-«КРОНТ»,

УДЭ-21-«КРОНТ» И ЭНДОДЕЗ - «КРОНТ» и др.) способами;

- предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, медицинских изделий (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся, а также стоматологические материалы) ручным и механизированным в моечно-дезинфицирующих машинах, в ультразвуковых, а также в специализированных установках отечественного и импортного производства, тип УДЭ-1-«КРОНТ», УДЭ-21-«КРОНТ» И ЭНДОДЕЗ - «КРОНТ» и др.) способами;

- предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным в моечно-дезинфицирующих машинах, в ультразвуковых, а также в специализированных установках отечественного и импортного производства, тип УДЭ-1-«КРОНТ», УДЭ-21-«КРОНТ» И ЭНДОДЕЗ - «КРОНТ» и др.) способами;

- окончательной очистки эндоскопов перед ДВУ ручным и механизированным в моечно-дезинфицирующих машинах, в ультразвуковых, а также в специализированных установках отечественного и импортного производства, тип УДЭ-1-«КРОНТ», УДЭ-21-«КРОНТ» И ЭНДОДЕЗ-«КРОНТ» и др.) способами;

- предварительной очистки эндоскопов – после их использования;

- дезинфекции на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, солярии, сауны, салоны красоты, бани, бассейны, аквапарки, прачечные, общественные туалеты, жилищный фонд подъезды домов, лифты и т.д.); в учреждениях образования, культуры, отдыха, спорта, административных учреждениях (культурно-оздоровительные комплексы, офисы, спорткомплексы, кинотеатры, музеи, офисы, банки и банковские терминалы и др.); на объектах курортологии (домах отдыха, пансионаты, санатории и др.); в учреждениях социального обеспечения (дома для инвалидов, престарелых, хосписы и др.), в местах массового скопления людей;

- дезинфекции помещений, оборудования, спецодежды, воздуха парикмахерских, массажных и косметических салонов, салонов красоты, прачечных, клубов, санпропускников и других объектов сферы обслуживания населения;

- дезинфекции, мытья и нейтрализации посторонних запахов помещений и оборудования (в том числе оборудования, имеющего контакт с пищевыми продуктами) на предприятиях общественного питания, в пищеблоках медицинских и других организаций, продовольственной торговли (рестораны, бары, кафе, столовые, включая супермаркеты, рынки, плодоовощные базы, склады, овоще- и фруктохранилища), потребительских рынках;

- дезинфекции на предприятиях пищевой промышленности (мясная, молочная, рыбная, птицеперерабатывающая, кондитерская, хлебобулочная, пивобезалкогольная, винодельческая, ликёроводочная и т. д.);

- дезинфекции на предприятиях парфюмерно-косметической, химико-фармацевтической, биотехнологической и микробиологической промышленности по производству стерильных и нестерильных лекарственных средств и иммунобиологических препаратов в помещениях классов чистоты А, В, С и D, на ветеринарных объектах, птицеводческих, животноводческих, звероводческих хозяйствах;

- дезинфекции, мойки и дезодорации холодильных камер, холодильных установок и холодильных помещений на предприятиях и в учреждениях любого профиля;

- дезинфекции и мытья помещений и оборудования в Вооруженных силах и Спасательных службах, учреждениях и ведомствах МЧС, МВД, Минобороны;

- дезинфекции санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов и продовольственного сырья;

- дезинфекции на объектах транспортной системы (автобусы, трамваи, троллейбусы, поезда дальнего следования, вагоны-рестораны и буфеты, электрички, пригородные экспрессы, вагоны метрополитена, вокзалы, станции и т.д.), авиации, речного и морского флота;

- дезинфекции кабин и отсеков воздушных судов гражданской авиации;

- обеззараживания поверхностей стен, пола и потолков в подъездах и подвалах домов;

- обеззараживания поверхностей в помещениях цехов и производственных помещениях;

- дезинфекции обуви из кожи, ткани, дерматина, резин, пластика и других полимерных материалов с целью профилактики инфекций грибковой этиологии (дерматофитии), в том числе, выдаваемой напрокат на объектах спортивного профиля и др.;

- для пропитывания дезинфицирующих ковриков, дезматов и дезбарьеров;

- для использования в моющих пылесосах и автоматических моющих машинах;

- для пропитывания салфеток для диспенсеров и последующего использования их для обработки поверхностей;

- проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических, детских дошкольных, школьных и других общеобразовательных и оздоровительных учреждениях и организациях, на коммунальных объектах, в пенитенциарных и других учреждениях и организациях;

- борьбы с плесенью;

- дезинфекции воздуха способом распыления на различных объектах, профилактической дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха (бытовые кондиционеры,

сплит-системы, мультizonальные сплит-системы, крышные кондиционеры, вентиляционные фильтры, воздуховоды и др.);

- дезинфекции, чистки, мойки и дезодорирования мусороборочного оборудования, мусоровозов, мусорных баков и мусоросборников, мусоропроводов;
- обеззараживания содержимого накопительных баков автономных туалетов, не имеющих отвода в канализацию, а также поверхностей в кабинах автономных туалетов и биотуалетов;
- обеззараживания поверхностей, объектов в моргах и зданиях патологоанатомических служб, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, в колумбариях, крематориях, похоронных бюро и ритуальных магазинах, домах траурных обрядов, других зданиях и сооружениях организаций, оказывающих ритуальные и похоронные услуги, а также для обработки автокатафалков;
- дезинфекции, мойки и удаления посторонних запахов в домах престарелых, медицинских вытрезвителях, санпропускниках, спецприемниках для лиц без определенного места жительства;
- для дезинфекции поверхности скорлупы яиц перед употреблением в пищу в лечебно-профилактических учреждениях, госпиталях, хосписах, детских школьных и дошкольных учреждениях и т. д.; для обеззараживания яиц на птицефабриках перед отправкой в торговую сеть, для дезинфекции яиц птиц перед закладкой в инкубаторы, для обеззараживания яиц в вирусологических лабораториях перед выполнением работ по получению куриных эмбрионов;
- использования в быту для мытья и дезинфекции поверхностей в помещениях, напольных ковровых покрытий, обивочных тканей, предметов обстановки, санитарно-технического оборудования, посуды, предметов для мытья посуды, белья, уборочного инвентаря и материала, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, игрушек, спортивного инвентаря, обуви, резиновых и полипропиленовых коврикoв, воздуха, борьбы с плесенью;
- обеззараживания (дезинвазии) предметов обихода, игрушек, помещений, лабораторной посуды, лабораторного оборудования и мебели, контаминированных возбудителями паразитарных болезней (яйцами и личинками остриц);
- для профессионального применения персоналом учреждений и клининговых компаний.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных или пластмассовых ёмкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры (таблица 1).

2.2. Контроль концентрации полученного свежего рабочего раствора, а также в процессе его хранения осуществляется с помощью индикаторных полосок «АБСОЛЮЦИД лайт»

Таблица 1. Приготовление рабочих растворов средства «АБСОЛЮЦИД лайт»

Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Количество средства «АБСОЛЮЦИД лайт» и воды необходимые для приготовления рабочего раствора объемом:			
	1 л		10 л	
	Средство, мл	Вода, мл	Средство, мл	Вода, мл
0,1	1,0	999,0	10,0	9990,0
0,2	2,0	998,0	20,0	9980,0
0,3	3,0	997,0	30,0	9970,0
0,5	5,0	995,0	50,0	9950,0
1,0	10,0	990,0	100,0	9900,0
1,5	15,0	985,0	150,0	9850,0
2,0	20,0	980,0	200,0	9800,0
2,5	25,0	975,0	250,0	9750,0
3,0	30,0	970,0	300,0	9700,0
4,0	40,0	960,0	400,0	9600,0
5,0	50,0	950,0	500,0	9500,0
6,0	60,0	940,0	600,0	9400,0
7,0	70,0	930,0	700,0	9300,0
8,0	80,0	920,0	800,0	9200,0

14,0	140,0	860,0	1400,0	8600,0
16,0	160,0	840,0	1600,0	8400,0
18,0	180,0	820,0	1800,0	8200,0

НЕЗ. ПИ

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «АБСОЛЮЦИД лайт» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ

3.1. Средство «АБСОЛЮЦИД лайт» применяют для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях (пол, стены, двери, подоконники и др.), жёсткой и мягкой мебели, наружных поверхностей приборов и аппаратов, предметов ухода за больными (подкладные клеёнки, грелки, пузыри для льда и др.), средств личной гигиены, игрушек, резиновых коврик, посуды столовой, лабораторной, аптечной (включая однократного использования), предметов для мытья посуды, санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы и др.), банных сандалий, тапочек и др. из резин, пластмасс, и других синтетических материалов и прочее согласно п. 1.4 настоящей инструкции.

Дезинфекцию объектов проводят методами протирания, орошения, погружения, замачивания. Режимы дезинфекции различных объектов приведены в таблицах 2-9.

3.2. Обеззараживание объектов способом протирания можно проводить в присутствии больных, без использования средств индивидуальной защиты. Обработку поверхностей и объектов растворами средства способом орошения проводить в отсутствии людей и с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В и глаз - герметичными очками. Средство несовместимо с мылами и анионными поверхностно-активными веществами.

3.3. Поверхности в помещениях (пол, стены, двери и т.п.), жёсткую мебель, поверхности приборов, аппаратов, мусороборочное оборудование протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства – 100мл/м² обрабатываемой поверхности. При обработке мягкой мебели, напольных и ковровых покрытий, поверхностей, имеющих пористость, шероховатости и неровности, допустимая норма расхода средства может составлять 100мл/м², при этом поверхности чистят щётками, смоченными в растворе средства.

При проведении дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях с помощью специального уборочного инвентаря (тележек, МОПов, салфеток) расход средства рекомендуется учитывать, согласно рекомендациям производителей уборочного оборудования.

Обработку объектов способом орошения проводят с помощью гидропульта, автомакса, аэрозольного генератора и других аппаратов или оборудования, разрешенных для этих целей, добиваясь равномерного и обильного смачивания (норма расхода – 150мл/м² при использовании распылителя типа «Квазар», 300 мл/м² – при использовании гидропульта; 150мл/м³ – при использовании аэрозольных генераторов).

При использовании современных аэрозольных генераторов с размером частиц создаваемого аэрозоля средства от 7 до 30 микрон норма расхода препарата может быть снижена от 10мл/м² поверхности.

Смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется. При обработке способом орошения закрытых, неветилируемых помещений рекомендуется их проветрить по окончании процесса дезинфекции в течение 10-15 минут.

3.4. При ежедневной уборке помещений в отделениях неонатологии способом протирания (при норме расхода 100мл/м²) используют рабочие растворы средства концентрацией 0,2%, 0,3%, 0,5% при времени дезинфекционной выдержки 60 мин., 30 мин., 15 мин. соответственно.

3.5. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и т.д.) обрабатывают с помощью щетки, ерша или протирают ветошью, смоченной в растворе средства, при норме расхода 150мл/м² обрабатываемой поверхности, при обработке способом орошения – 300мл/м² (гидропульт, автомакс), 150мл/м² (распылитель типа «Квазар»). По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой.

3.6. Предметы ухода за больными (термометры, грелки, наконечники для клизм, подкладные клеёнки, пузыри для льда, судна и др.), средства личной гигиены, спортивный инвентарь полностью погружают в ёмкость с рабочим раствором средства или протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором. По окончании дезинфекции их промывают проточной питьевой водой в течение 3 минут.

3.7. Игрушки (за исключением мягких) полностью погружают в ёмкость с рабочим раствором средства, препятствуя их всплытию или протирают ветошью, смоченной в растворе средства. Крупные игрушки допустимо обрабатывать способом орошения. По окончании дезинфекции мелкие игрушки

промывают проточной водой в течение 3 минут, крупные протирают ветошью, смоченной водой.

3.8. Столовую посуду, чайную (в том числе одноразовую) освобождают от остатков пищи и полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на 1 комплект. Ёмкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной питьевой водой с помощью щётки в течение 3 минут, а посуду однократного применения утилизируют.

Кухонное оборудование

(разделочные, раздаточные столы и др.) клеёнки, скатерти, кухонный инвентарь (доски разделочные, лотки, ножи, кастрюли, мясорубки и др.) протирают тканью (салфетками), смоченной раствором средства, или погружают в рабочий раствор. Поверхности, соприкасающиеся с продуктами питания, по окончании дезинфекции промывают питьевой водой и дают высохнуть.

3.9. Посуду лабораторную (пробирки, пипетки, колбы, предметные, покровные стёкла, цилиндры, колбы, флаконы, чашки Петри, планшеты для иммунологического анализа, резиновые груши, пластмассовые и резиновые пробки и т.д.) полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на 10 единиц. Большие ёмкости погружают в рабочий раствор средства таким образом, чтобы толщина слоя раствора средства над изделиями была не менее 1 см. По окончании дезинфекции изделия промывают водой в течение 3 минут.

3.10. Предметы для мытья посуды погружают в рабочий раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки их прополаскивают и высушивают.

3.11. Белье, в том числе одноразового применения, замачивают в рабочем растворе средства из расчета 4 л на 1 кг сухого белья. Ёмкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекционной выдержки белье стирают и прополаскивают.

3.12. Уборочный материал, МОПы замачивают в растворе средства, инвентарь – погружают или протирают ветошью, смоченной в растворе средства, по окончании дезинфекции прополаскивают и высушивают.

3.13. Резиновые или пропиленовые коврики обеззараживают, протирая ветошью, смоченной в рабочем растворе средства, или полностью погружают в раствор средства (таблица 6). По окончании дезинфекции их промывают проточной водой.

3.14. Внутреннюю поверхность обуви дважды протирают тампоном, обильно смоченным дезинфицирующим раствором (таблицы 5,6). Банные сандалии, тапочки из резины, пластмассы и других полимерных материалов погружают в рабочий раствор средства, препятствуя её всплытию. По окончании дезинфекционной выдержки её промывают водой и высушивают.

3.15. Для дезинфекции, чистки, мойки и дезодорирования мусороуборочного оборудования, мусоровозов, мусорных баков и мусоросборников, мусоропроводов используют режимы обработки, представленные в таблице 2.

3.16. Для борьбы с плесневыми грибами поверхности в помещениях сначала очищают от плесени с защитой органов дыхания маской, затем двукратно протирают ветошью, смоченной в растворе средства, с интервалом между обработками 15 мин, или орошают из аппаратуры типа «Квазар» из расчета 150 мл/м² двукратно с интервалом между обработками 15 мин. в соответствии с режимами (таблица 7). Для предотвращения роста плесени в дальнейшем обработку повторяют через 1 месяц.

3.17. При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях необходимо руководствоваться режимами, представленными в таблице 10.

3.18. Профилактическую дезинфекцию поверхностей в помещениях, жесткой мебели, наружных поверхностей приборов и аппаратов на предприятиях фармацевтической и биотехнологической промышленности по производству стерильных и нестерильных лекарственных средств в помещениях классов чистоты А, В, С и D проводят по режимам, представленным в таблице 2.

3.19. Дезинфекцию на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития и т.д.), культурных, административных объектах, офисах, предприятиях общественного питания, продовольственной торговли, промышленных рынках, общественных туалетах, детских учреждениях, учреждениях социального обеспечения, автотранспорте для перевозки пищевых продуктов растворами средства проводят в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции

объектов при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях. Режимы профилактической дезинфекции представлены в таблице 11.

В пенитенциарных учреждениях дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, рекомендованными в таблице 4.

В вооруженных силах и спасательных службах дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, рекомендованными в таблице 2.

3.20. В банях, саунах, бассейнах, аквапарках, спортивных комплексах дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции объектов при дерматофитиях (таблица 6) или, при необходимости, по режимам, рекомендованным для обработки при плесневых поражениях (таблица 7). Режимы профилактической дезинфекции представлены в таблице 12.

3.21. Обработку объектов санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов проводят способом орошения или протирания в соответствии с режимами, указанным в таблице 4. Обеззараживание санитарного транспорта для перевозки инфекционных больных проводят по режиму обработки при соответствующей инфекции.

При проведении *профилактической дезинфекции* в условиях отсутствия видимых органических загрязнений на объектах транспорта допустимо использование режимов обработки, указанных в таблице 2. После дезинфекции автотранспорта для перевозки пищевых продуктов обработанные поверхности промывают водой и вытирают насухо.

Обработку поверхностей и объектов на грузовом, общественном транспорте и метрополитене, кабин и отсеков воздушных судов гражданской авиации проводят по режимам, указанным в таблице 4.

3.22. Дезинфекцию поверхностей помещений, оборудования, инвентаря в парикмахерских, салонах красоты, косметических и массажных салонах, СПА-центрах проводят в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, регулирующими деятельность этих объектов (СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги»). СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

3.22.1. Дезинфекцию поверхностей, оборудования, инструментария, воздуха на объектах сферы обслуживания (парикмахерские, салоны красоты, косметические и массажные салоны и т.п.) проводят по режимам при вирусных инфекциях и дерматофитиях (таблицы 4, 6).

3.22.2. Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос дезинфицируют методом погружения по режиму, применяемому при грибковых (дерматофитии) заболеваниях (таблица 6).

3.22.3. Ванны для ног и ванночки для рук после каждого клиента должны подвергаться дезинфекции при полном погружении в дезинфицирующий раствор по режиму, применяемому при грибковых (дерматофитии) заболеваниях (таблица 6).

3.22.4. Подушка, подкладываемая под ногу, при проведении педикюра должна иметь клеёночный чехол, который после каждого использования протирается губкой, салфеткой или ветошью, смоченной раствором средства по режиму, применяемому при грибковых заболеваниях (таблица 6).

3.22.5. Дезинфекцию и мойку, совмещенную с дезинфекцией, соляриев проводят после каждого клиента раствором средства, нанесенным на губку, салфетку, ветошь или щетку.

3.22.6. Инструменты, используемые для манипуляций, при которых возможно повреждение кожных покровов или слизистых оболочек (маникюр, педикюр, татуаж, пирсинг, пилинг, косметические услуги) после каждого клиента промывают под проточной водой и помещают в дезинфицирующий раствор. Дезинфекцию осуществляют по режимам, применяемым при вирусных инфекциях (таблица 4). После окончания дезинфекции инструменты подвергают предстерилизационной очистке и стерилизации.

3.22.7. Инвентарь, используемый для уборки всех помещений, педикюрного и маникюрного кабинета, дезинфицируют погружением в раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки прополаскивают водой.

3.23. Дезинфекцию воздуха проводят с помощью соответствующих технических установок способом распыления рабочего раствора средства по режимам, указанным в таблице 14, при норме расхода 1 мл/м³. Предварительно проводят дезинфекцию поверхностей, помещение герметизируют: закрывают окна и двери, отключают приточно-вытяжную вентиляцию.

3.24. Дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования проводят при полном их отключении (кроме п.п.3.24.8) с привлечением и под руководством инженеров по вентиляции по режимам, указанным в таблице 14.

Профилактическую дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования воздуха проводят 1 раз в квартал в соответствии с требованиями, изложенными в СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», а также в «Методических рекомендациях по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха», утвержденных ФГУ ЦГСЭН г. Москвы, 2004 г.

Текущую и заключительную дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха проводят по эпидпоказаниям.

3.24.1. Дезинфекции подвергаются:

- воздуховоды, вентиляционные шахты, решётки и поверхности вентиляторов вентиляционных систем;
- поверхности кондиционеров и конструктивных элементов систем кондиционирования помещений, сплит-систем, мультizonальных сплит-систем, крышных кондиционеров;
- камеры очистки и охлаждения воздуха кондиционеров;
- уборочный инвентарь;
- при обработке особое внимание уделяют местам скопления посторонней микрофлоры в щелях, узких и труднодоступных местах систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

3.24.2. Дезинфекцию проводят способами протирания, замачивания, погружения, орошения и аэрозолирования. Используют рабочие растворы средства комнатной температуры.

3.24.3. Перед дезинфекцией проводят мойку поверхностей мыльно-содовым раствором с последующим смытием, поскольку средство несовместимо с мылами. В качестве моющего раствора можно использовать 0,1% раствор средства «АБСОЛЮЦИД лайт», в этом случае смытие водой перед дезинфекцией не требуется. Для профилактической дезинфекции используют 0,2%, 0,3%, 0,5% водные растворы средства способом орошения или протирания при времени дезинфекционной выдержки соответственно 60 мин, 30 мин. или 15 мин. Радиаторную решётку и накопитель конденсата кондиционера протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором.

3.24.4. Поверхности кондиционеров и поверхности конструктивных элементов систем кондиционирования воздуха протирают ветошью, смоченной в растворе средства, при норме расхода 100мл/м². Работу со средством способом протирания можно проводить в присутствии людей.

3.24.5. Обработку объектов способом орошения проводят с помощью гидропульта или автомакса при норме расхода 400 мл/м², с помощью других аппаратов (типа «Квазар») - при норме расхода 250мл/м², с использованием способа аэрозолирования – при норме расхода 150мл/м², добиваясь равномерного и обильного смачивания. По истечении экспозиции остаток рабочего раствора удаляют с поверхности сухой ветошью.

3.24.6. Камеру очистки и охлаждения воздуха систем кондиционирования воздуха обеззараживают орошением или аэрозолированием при работающем кондиционере со снятым фильтрующим элементом по ходу поступления воздуха из помещения в кондиционер.

3.24.7. Поверхности вентиляторов и поверхности конструктивных элементов систем вентиляции помещений протирают ветошью, смоченной в растворе средства.

3.24.8. Воздуховоды систем вентиляции помещений обеззараживают орошением из распылителя типа «Квазар» при норме расхода 250мл/м² или аэрозолированием при норме расхода 150мл/м² последовательно сегментами по 1-2 м.

3.24.9. Бывшие в употреблении фильтрационные элементы кондиционеров и систем вентиляции помещений замачивают в рабочем растворе средства. Фильтры после дезинфекции утилизируют.

3.24.10. Вентиляционное оборудование чистят ершом или щёткой, после чего протирают ветошью, смоченной в растворе средства, или орошают.

3.25. Дезинфекцию (обезвреживание) медицинских отходов, остатков пищи в лечебно-профилактических учреждений, в том числе инфекционных отделений, кожно-венерологических, фтизиатрических и микологических больниц, объектов санитарного транспорта, а также лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 группами патогенности (исключая особо опасные инфекции), производят с учетом требований СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и Санитарно-эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней» (п.п.2.12.8) СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» в соответствии с

режимами, рекомендованными в таблице 10, с последующей утилизацией.

3.25.1. Медицинские отходы из текстильных материалов (использованный перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны, белье нательное однократного применения, постельное, одежда персонала, маски и пр.) погружают в отдельную ёмкость с раствором средства. По окончании дезинфекции отходы утилизируют.

3.25.2. Дезинфекцию медицинских изделий однократного применения осуществляют в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) ёмкостях, закрывающихся крышками. При проведении дезинфекции изделия полностью погружают в раствор средства. Разъёмные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий. Во время замачивания (дезинфекционной выдержки) каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см. После окончания дезинфекции изделия извлекают из ёмкости с раствором и утилизируют. Обеззараживание шприцев инъекционных однократного применения проводят в соответствии с МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного применения».

3.25.3. Контейнеры для сбора и удаления медицинских отходов обрабатывают способом протирания или орошения.

3.25.4. Остатки пищи смешивают с рабочим раствором в соотношении 1:1, выдерживают в течение времени экспозиции.

3.26. Дезинфекция кувезов.

Обработку кувезов и приспособлений к ним следует проводить в отдельном помещении в отсутствие детей по режимам, указанным в таблицах 2,4,5.

Обеззараживание наружных и внутренних поверхностей кувезов проводят способом протирания; приспособления в виде резервуара увлажнителя, воздухозаборных трубок, шлангов, узла подготовки кислорода и др. дезинфицируют способом погружения в растворы средства.

По окончании дезинфекции поверхности кувеза из пластмассы и оргстекла двукратно протирают стерильными тканевыми салфетками, обильно смоченными в стерильной воде, вытирая насухо после каждого промывания стерильными салфетками.

По окончании дезинфекции все приспособления промывают путем двукратного погружения в стерильную воду по 10 минут каждое, прокачав воду через трубки и шланги. Приспособления высушивают с помощью стерильных тканевых салфеток.

После окончания обработки кувезы следует проветривать в течение 15 минут.

Обработку кувезов проводят в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

При обработке кувезов необходимо учитывать рекомендации производителя кувезов.

3.27. Обработку комплектующих деталей наркозно-дыхательной, ингаляционной аппаратуры, анестезиологического оборудования проводят в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

Комплектующие детали (эндотрахеальные трубки, трахеотомические канюли, ротоглоточные воздуховоды, лицевые маски, анестезиологические шланги) погружают в раствор средства на время экспозиции. После окончания дезинфекции их извлекают из ёмкости с раствором и отмывают от остатков средства последовательно в двух порциях стерильной питьевой воды по 5 минут в каждой, затем сушат и хранят в асептических условиях. Обработку проводят в соответствии с режимами, указанными в таблицах 2,4,5.

3.28. Дезинфекцию датчиков УЗИ проводят протиранием ветошью, смоченной в растворе средства, при норме расхода 100мл/м² или погружением в ёмкость с рабочим раствором средства до уровня горизонтальной отметки на поверхности датчика в соответствии с режимами, указанными в таблицах 2-6. Перед дезинфекцией датчиков УЗИ проводят их очистку. Для этого отсоединяют датчики от стойки системы и удаляют ультразвуковой гель с поверхности путём протирания чистой мягкой салфеткой, смоченной питьевой водой, далее их промывают слабым мыльным раствором тёплой воды для снятия всех видимых загрязнений и просушивают путём оставления на открытом воздухе или протиранием насухо чистой мягкой салфеткой.

По окончании дезинфекции датчики отмывают от остаточных количеств средства путём промывания

проточной водой в течение 5 минут, далее их высушивают с помощью мягких салфеток.

3.29. Для использования в дезковриках используют 4% раствор средства. Объем заливаемого раствора средства зависит от размера коврика и указан в инструкции по эксплуатации дезковрика. Смена рабочего раствора зависит от интенсивности использования коврика. В среднем смена раствора дезсредства происходит 1 раз в 3 суток.

3.30. Для обеззараживания поверхностей и объектов в моргах и зданиях патологоанатомических служб, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, в колумбариях, крематориях, похоронных бюро и бюро-магазинах, домах траурных обрядов, других зданиях и сооружениях организаций, оказывающих ритуальные и похоронные услуги, средство может быть использовано по режимам таблицы 4. Автокатафалки обрабатывают по режимам обработки санитарного транспорта (таблица 4).

3.31. Обработку скорлупы яиц (сырых и вареных) осуществляют в отведенном месте в специальных промаркированных ёмкостях в соответствии «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и пищевого сырья «СП 2.3.6.1079-01», утверждённых Минздравом РФ 08.11.2001 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; СанПиН 2.3.5.021-94 «Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли, утверждённых Госкомсанэпиднадзором России 30.12.1994. СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию»

3.31.1. Дезинфекция яиц без видимых загрязнений скорлупы:

Обработка яиц, используемых для приготовления блюд, осуществляется в отведенном месте в специальных промаркированных ёмкостях в следующей последовательности: отсортированные яйца (проверенные на отсутствие повреждений скорлупы), без видимых загрязнений погружаются в 0,3% или 0,5% растворы средства на 10 минут или 5 минут соответственно, после чего их ополаскивают холодной проточной водой. Обработка проводится при температуре 18-30⁰С. Чистое яйцо выкладывают в чистую промаркированную посуду.

3.31.2 Дезинфекция яиц с загрязненной скорлупой:

Для совмещения мойки и дезинфекции в одном этапе яйца с загрязненной скорлупой устанавливают в ящиках, пластмассовых прокладках или другой таре на решётки в ванну для замачивания в 0,5% или 1,0% растворе средства при температуре 18-30 °С на 10 минут или 5 минут соответственно. По истечении времени экспозиции яйца очищают щётками в том же растворе, после чего направляют во вторую секцию для ополаскивания, где яйца ополаскивают проточной водой с температурой 18-30 °С до полного смыывания следов дезинфектанта (не менее 1 минуты).

При проведении совмещенной мойки и дезинфекции поверхности скорлупы яиц рабочий раствор используют однократно.

Обработанные яйца ставят на решётки стеллажи на 15-20 мин для стекания воды и подсушивания. Чистое яйцо выкладывают в чистую промаркированную посуду.

Режимы обеззараживания куриных яиц рабочими растворами средства приведены в таблице 2.

3.32. Профилактическую, текущую и вынужденную дезинфекцию, совмещенную с мойкой, поверхностей помещений, стеллажей, инвентаря, тары на плодоовощных базах, складах, овоще- и фруктохранилищах для предупреждения развития гнилостных бактерий проводят после механической очистки 0,2% раствором средства при экспозиции 60 минут, 0,3% раствором средства при экспозиции 30 минут, 0,5% раствором средства при экспозиции 15 минут. Норма расхода средства составляет 100мл/м². После экспозиции поверхности, непосредственно контактирующие с пищевыми продуктами, дважды протирают ветошью или тканевой салфеткой, обильно смоченной проточной водой. Мелкий инвентарь отмывают от остатков средства проточной водой. Смыывание рабочих растворов средства с поверхностей, не контактирующих с пищей (пол, стены, двери, и пр.) не требуется.

Поверхности, поражённые плесенью, сначала очищают от плесени, затем двукратно, с интервалом между обработками 15 минут обрабатывают способом протирания или орошения 4%, 6% или 8% раствором средства при экспозиции 120 мин., 60 мин. или 30 мин. соответственно. Для предотвращения роста плесени повторную обработку проводят через 1 месяц.

3.33. Для использования моющих пылесосов и автоматических моющих машин приготовить рабочий раствор средства необходимой концентрации, добавить в моющий пылесос или автоматическую моющую машину и провести обработку согласно инструкции по применению данного оборудования по режимам соответствующей инфекции.

3.34. Обработку поверхностей возможно проводить с помощью пропитанных рабочим раствором

салфеток, помещённых в Диспенсерную систему «АБСОЛЮСЕПТ СССР».

3.34.1. Применение средства «АБСОЛЮЦИД лайт» с помощью «АБСОЛЮСЕПТ СССР». Для приготовления салфеток к использованию открывают крышку диспенсерной системы с салфетками и равномерно, в верхнюю часть рулона аккуратно заливают средство в количестве от 2,1 л до 3,0 л в зависимости от размера и плотности рулона салфеток и объёма ёмкости-диспенсора в соответствии с таблицей 1, Инструкции 15 по применению «АБСОЛЮСЕПТ СССР». Крышку банки плотно закрывают, и оставляют на 10-20 минут при комнатной температуре, за это время все салфетки должны быть полностью пропитаны дезинфицирующим средством. Наклеить на ёмкость-диспенсер заполненный формуляр, на котором указать наименование средства «АБСОЛЮЦИД лайт», концентрацию рабочего раствора, размер салфеток, количество салфеток в упаковке, дату пропитки салфеток, срок годности. После пропитывания салфеток крышку диспенсера открыть, аккуратно продеть первую салфетку из середины рулона сквозь прорезь в крышке диспенсера и плотно закрыть крышку. После извлечения необходимого количества салфеток ёмкость-диспенсер следует сразу же закрыть крышкой во избежание высыхания салфеток.

Срок годности салфеток, пропитанных средством - 50 суток.

3.34.2. Дезинфекция небольших по площади поверхностей с помощью приготовленных влажных салфеток из Диспенсерной системы «АБСОЛЮСЕПТ СССР» проводится по режимам соответствующей инфекции методом протирания.

В зависимости от размера и конфигурации поверхностей для их обработки используют одну или, в случае необходимости, несколько салфеток.

3.35. Рабочие растворы средства можно применять для обработки любых объектов многократно в течение срока, не превышающего 50 дней, если их внешний вид не изменился. При первых признаках изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор следует заменить.

Таблица 2. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства

«АБСОЛЮЦИД лайт» при бактериальных (кроме туберкулеза),

включая возбудителей внутрибольничных инфекций.

Объекты обеззараживания *	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обеззараживания (мин)	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях (пол, стены, жёсткая мебель, в т.ч из дерева), предметы обстановки, поверхности приборов, аппаратов; профилактическая дезинфекция санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов	0,2 0,3 0,5 1,0	60 30 15 5	Протирание или орошение
Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, мягкая мебель	0,2 0,3 0,5	60 30 15	Протирание, обработка с помощью щётки
Предметы ухода за больными из металлов, резин, пластмасс, стекла, не загрязненные биологическими жидкостями (кровью, сывороткой крови и пр.)	0,3 0,5 1,0	60 30 15	Протирание или погружение
Белье, не загрязненное выделениями	0,3 0,5 1,0	60 30 15	Замачивание
Бельё, загрязненное выделениями	1,0 1,5 2,0	60 30 15	Замачивание
Санитарно-техническое оборудование	0,2 0,3 0,5	60 30 15	Протирание или орошение
Поверхности и оборудование биотуалетов	0,2 0,3 0,5	60 30 15	Протирание или орошение

Посуда без остатков пищи, в т.ч. одноразовая	0,2 0,3 0,5	60 30 15	Погружение
Посуда с остатками пищи, в т.ч. одноразовая, кухонный инвентарь (кастрюли, ножи, мясорубки и др)	1,0 1,5 2,0	60 30 15	Погружение
Предметы для мытья посуды	1,0 1,5 2,0	60 30 15	Погружение
Посуда лабораторная и аптечная, в т.ч. одноразовая	1,0 1,5 2,0	60 30 15	Погружение
Игрушки, спортивный инвентарь, средства личной гигиены (из пластмассы, резины, металла)	0,2 0,3 0,5	60 30 15	Погружение, протираание, орошение (крупные)
Уборочный материал (ерши, щётки, ветошь), инвентарь, МОПы	1,0 1,5 2,0	60 30 15	Замачивание, погружение, протираание
Кюветы			
Кюветы, пеленальные, реанимационные столы; приспособления наркозно-дыхательной, ингаляционной аппаратуры, анестезиологического оборудования	0,2 0,3 0,5	60 30 15	Протираание или орошение
Скорлупа куриных яиц - незагрязненные органическими веществами - загрязненные органическими веществами	0,3 0,5 0,5 1,0	10 5 10 5	Погружение
Мусороуборочное оборудование	0,2 0,3 0,5	60 30 15	Протираание или орошение
Обработка воздуха помещений	0,2 0,3 0,5	60 30 15	Распыление

Таблица 3. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при туберкулезе (тестировано на *Mycobacterium terrae*)

Объекты обеззараживания *	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обеззараживания (мин)	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях (пол, стены, жёсткая мебель, в т.ч из дерева), предметы обстановки, поверхности приборов, аппаратов; <i>профилактическая дезинфекция санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов</i>	14,0 18,0	120 60	Протирание или орошение
Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, мягкая мебель	18,0	120	Протирание, обработка с помощью щётки
Предметы ухода за больными из металлов, резин, пластмасс, стекла, не загрязненные биологическими жидкостями (кровью, сывороткой крови и пр.)	14,0 18,0	120 90	Протирание или погружение
Белье, не загрязненное выделениями	14,0	90	Замачивание
Белье, загрязненное выделениями	14,0 18,0	120 90	Замачивание
Санитарно-техническое оборудование	14,0 18,0	120 90	Протирание или орошение
Поверхности и оборудование биотуалетов	14,0 18,0	120 90	Протирание или орошение
Посуда без остатков пищи, в т.ч. одноразовая	14,0	90	Погружение
Посуда с остатками пищи, в т.ч. одноразовая, кухонный инвентарь (кастрюли, ножи, мясорубки и др)	14,0 18,0	120 90	Погружение
Предметы для мытья посуды	14,0 18,0	120 90	Погружение
Посуда лабораторная и аптечная, в т.ч. одноразовая	14,0 18,0	120 90	Погружение
Игрушки, спортивный инвентарь, средства личной гигиены (из пластмассы, резины, металла)	14,0 18,0	120 90	Погружение, протирание, орошение (крупные)
Уборочный материал (ерши, щётки, ветошь), инвентарь, МОПы	14,0 18,0	120 90	Замачивание, погружение, протирание

Таблица 4. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при инфекциях вирусной этиологии

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора препарата (по препарату), %	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях (пол, стены, жёсткая мебель, в т.ч. из дерева), предметы обстановки, поверхности приборов, аппаратов; <i>профилактическая дезинфекция</i> санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов	2,0 3,0 4,0	60 30 15	Протирание или орошение
Поверхности мягкие, в т.п. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, мягкая мебель	2,0 3,0 4,0	60 30 15	Протирание, обработка с помощью щётки
Санитарно-техническое оборудование	2,0 3,0 4,0	60 30 15	Протирание или орошение
Посуда без остатков пищи, в т.ч. одноразовая	3,0 4,0	60 15	Погружение
Посуда с остатками пищи, в т.ч. одноразовая, кухонный инвентарь (кастрюли, ножи, мясорубки и др)	4,0 5,0 6,0	90 60 30	Погружение
Предметы для мытья посуды	4,0 5,0 6,0	90 60 30	Погружение
Посуда лабораторная и аптечная (пробирки, пипетки, предметные стекла), резиновые груши, шланги, в т.ч. одноразовые	4,0 5,0 6,0	90 60 30	Погружение
Белье, не загрязненное выделениями	3,0 4,0	60 30	Замачивание
Белье, загрязненное выделениями*	4,0 5,0 6,0	90 60 30	Замачивание
Игрушки, спортивный инвентарь, средства личной гигиены (из пластмассы, резины, металла)	4,0 5,0 6,0	90 60 30	Погружение, протирание, орошение (крупные)
Предметы ухода за больными из металлов, резин, пластмасс, стекла	4,0 6,0	90 30	Погружение или протирание
Уборочный материал (ерши, щётки, ветошь), инвентарь, МОПы	4,0 5,0 6,0	90 60 30	Замачивание, протирание
Кувезы, пеленальные, реанимационные столы; приспособления наркозно-дыхательной, ингаляционной аппаратуры, анестезиологического	2,0 3,0 4,0	60 30 15	Протирание или погружение

Медицинские изделия, инструменты парикмахерских, салонов красоты, маникюрных и педикюрных кабинетов и пр. -беззамковые	2,0	60	Погружение
	3,0	30	
	4,0	15	
	2,0	60	
	4,0	30	
	5,0	15	
Медицинские изделия однократного применения	3,0	60	Погружение
	4,0	30	
Медицинские отходы: перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, бинты, белье однократного	3,0	120	Замачивание
	4,0	90	
	5,0	60	
Мусороуборочное оборудование	2,0	60	Протирание или орошение
	3,0	30	
	4,0	15	
Контейнеры для сбора медицинских отходов	4,0	90	Погружение, протирание, орошение
	5,0	60	
	6,0	30	
Обработка воздуха помещений	2,0	60	Распыление
	3,0	30	
	4,0	15	

*Начальная температура рабочего раствора 40°C не поддерживается в процессе дезинфекции

Таблица 5. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при кандидозах

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора препарата(по препарату), %	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях (пол, стены, жёсткая мебель, в т.ч. из дерева), предметы обстановки, поверхности приборов, аппаратов; <i>профилактическая дезинфекция</i> санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов	1,0	60	Протирание или орошение
	1,5	30	
	2,0	15	
Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, мягкая мебель	1,0	60	Протирание, обработка с помощью щётки
	1,5	30	
	2,0	15	
Белье, не загрязненное выделениями	1,0	60	Замачивание
	1,5	30	
	2,0	15	
Белье, загрязненное выделениями	2,0	90	Замачивание
	4,0	60	
	5,0	30	
Санитарно-техническое оборудование	1,0	60	Протирание или орошение
	1,5	30	
	2,0	15	

Посуда без остатков пищи, в т.ч. одноразовая	1,0	60	Погружение
	1,5	30	
	2,0	15	
Предметы для мытья посуды	4,0	60	Погружение
	5,0	30	
Посуда с остатками пищи, в т.ч. одноразовая	4,0	60	Погружение
	5,0	30	
Посуда лабораторная и аптечная (пробирки, пипетки, предметные стекла), резиновые груши, шланги, в т.ч. одноразовые	4,0	60	Погружение
	5,0	30	
Предметы ухода за больными, средства личной гигиены из металлов, резин, пластмасс, стекла	4,0	60	Погружение или протирание
	5,0	30	
Кувезы, приспособления наркозно-дыхательной, ингаляционной аппаратуры, анестезиологического оборудования	1,0	60	Протирание или погружение
	1,5	30	
	2,0	15	
Игрушки, спортивный инвентарь, средства личной гигиены (из пластмассы, резины, металла)	1,5	60	Погружение, протирание, орошение (крупные)
	2,0	30	
	2,5	15	
Уборочный материал (ерши, щётки, ветошь), инвентарь, МОПы	4,0	60	Замачивание, протирание
	5,0	30	
Банные сандалии, тапочки и др. из резины, пластмасс и др. синтетических материалов	4,0	60	Погружение
	5,0	30	
Медицинские изделия	2,0	60	Погружение
	3,0	30	
	4,0	15	
Медицинские отходы: перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, бинты, белье однократного применения	3,0	120	Замачивание
	4,0	90	
Медицинские изделия однократного применения	3,0	60	Погружение
	4,0	30	
Обработка воздуха помещений	1,0	60	Распыление

Таблица 6. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при дерматофитиях

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора препарата (по препарату), %	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях (пол, стены, жёсткая мебель, в т.ч. из дерева), предметы обстановки, поверхности приборов, аппаратов; <i>профилактическая дезинфекция</i> санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов	1,0	120	Протирание или орошение
	2,0	90	
	2,5	60	
	3,0	30	
Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, мягкая мебель	2,5	60	Протирание, обработка с помощью щётки
	3,0	30	

Белье, не загрязненное выделениями	2,5	60	Замачивание
	3,0	30	
Белье, загрязненное выделениями	4,0	90	Замачивание
	5,0	60	
Санитарно-техническое оборудование	2,0	90	Протирание или орошение
	2,5	60	
	3,0	30	
Игрушки, спортивный инвентарь, средства личной гигиены (из пластмассы, резины, металла)	1,5	60	Погружение, протирание, орошение (крупные)
	2,0	30	
	2,5	15	
Посуда без остатков пищи, в т.ч. одноразовая	2,5	60	Погружение
	3,0	30	
Предметы для мытья посуды	4,0	60	Погружение
	5,0	30	
Посуда с остатками пищи, в т.ч. одноразовая	4,0	90	Погружение
	5,0	60	
Посуда лабораторная и аптечная (пробирки, пипетки, предметные стекла), резиновые груши, шланги, в т.ч. одноразовые	4,0	90	Погружение
	5,0	60	
Уборочный материал (ерши, щётки, ветошь), инвентарь, МОПы	4,0	60	Замачивание, протирание
	5,0	30	
Банные сандалии, тапочки и др. из резины, пластмасс и др. синтетических материалов	4,0	90	Погружение
	5,0	60	
	6,0	30	
Резиновые и полипропиленовые коврики, деревянные решётки	4,0	90	Погружение или протирание
	5,0	60	
	6,0	30	
Расчески, щётки, ножницы для стрижки волос, ванны для ног и ванночки для рук	2,0	90	Погружение или протирание
	2,5	60	
	3,0	30	
Предметы ухода за больными	4,0	90	Погружение или протирание
	5,0	60	
Медицинские изделия	3,0	60	Погружение
	4,0	30	
	5,0	15	
Медицинские отходы: перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, бинты, белье одноразового	3,0	120	Замачивание
	4,0	90	
	5,0	60	
Медицинские изделия одноразового применения	3,0	60	Погружение
	4,0	30	
Обработка воздуха помещений	2,0	30	Распыление

Таблица 7. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при контаминации плесневыми грибами *Aspergillus niger*

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора препарата (по препарату), %	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях (пол, стены, жёсткая мебель), предметы обстановки,	4,0 6,0 8,0	120 90 30	Двукратное протирание или орошение с интервалом 15 мин.
Белье, загрязненное выделениями	4,0 6,0	120 60	Замачивание
Посуда без остатков пищи, в т.ч. одноразовая	4,0 6,0 8,0	120 60 30	Погружение
Посуда с остатками пищи, в т.ч. одноразовая	4,0 6,0 8,0	120 60 30	Погружение
Посуда лабораторная и аптечная	4,0 6,0 8,0	120 60 30	Погружение
Уборочный материал (ерши, щётки, ветошь), инвентарь	4,0 6,0 8,0	120 60 30	Погружение
Санитарно-техническое оборудование	4,0 6,0 8,0	120 60 30	Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин
Предметы для мытья посуды	4,0 5,0	90 60	Погружение
Резиновые и полипропиленовые коврики, деревянные решётки	4,0 6,0 8,0	120 60 30	Погружение или протирание
Медицинские изделия	4,0 6,0 8,0	120 60 30	Погружение или протирание
Медицинские отходы: перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, бинты, белье однократного применения	4,0 6,0	120 60	Замачивание
Медицинские изделия однократного применения	6,0 8,0	60 30	Погружение
Обработка воздуха помещений	2,0	30	Распыление

Таблица 8. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при особо опасных инфекциях (чума, холера, туляремия)

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора препарата(по препарату), %	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях (пол, стены, жёсткая мебель, в т.ч. из дерева), предметы обстановки, поверхности приборов, аппаратов; <i>профилактическая дезинфекция</i> санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов	2,0	60	Протирание
	3,0	30	
	4,0	15	
	3,0	60	Орошение
	4,0	30	
Поверхности в помещениях (пол, стены, жёсткая мебель, в т.ч. из дерева), предметы обстановки, поверхности приборов, аппаратов; <i>профилактическая дезинфекция</i> санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов, загрязненные органическими выделениями	5,0	90	Орошение
	6,0	60	
Белье, загрязненное выделениями	4,0	90	Замачивание
	5,0	60	
	6,0	30	
Санитарно-техническое оборудование	2,0	60	Протирание или орошение
	3,0	30	
	4,0	15	
Предметы для мытья посуды	2,0	60	Погружение
	3,0	30	
	4,0	15	
Посуда без остатков пищи, в т.ч. одноразовая	2,0	60	Погружение
	3,0	30	
	4,0	15	
Посуда столовая с остатками пищи, в т.ч. одноразовая	5,0	60	Погружение
	6,0	30	
Предметы ухода за больными, средства личной гигиены из металлов, резин, пластмасс, стекла	2,0	60	Погружение или протирание
	3,0	30	
	4,0	15	
Игрушки, спортивный инвентарь, средства личной гигиены (из пластмассы, резины, металла)	2,0	60	Погружение, протирание, орошение (крупные)
	3,0	30	
	4,0	15	
Уборочный материал (ерши, щётки, ветошь), инвентарь, МОПы	4,0	90	Замачивание, погружение, протирание
	5,0	60	
	6,0	30	
Медицинские изделия	2,0	60	Погружение
	3,0	30	
	4,0	15	
Медицинские отходы: перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, бинты, белье одноразового	4,0	120	Замачивание
	3,0	60	
Обработка воздуха помещений	1,0	60	Распыление
	2,5	30	

Таблица 9. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при анаэробных инфекциях

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора препарата (по препарату), %	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях (пол, стены, жёсткая мебель, в т.ч. из дерева), предметы обстановки, поверхности приборов, аппаратов; <i>профилактическая дезинфекция</i> санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов	1,0 2,0 3,0	120 90 60	Протирание или орошение
Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, мягкая мебель	2,5 3,0	60 30	Протирание, обработка с помощью щётки
Белье, не загрязненное выделениями	2,5 3,0	60 30	Замачивание
Белье, загрязненное выделениями	4,0 5,0	90 60	Замачивание
Санитарно-техническое оборудование	2,0 2,5 3,0	90 60 30	Протирание или орошение
Игрушки, спортивный инвентарь, средства личной гигиены (из пластмассы, резины, металла)	1,5 2,0 2,5	60 30 15	Погружение, протирание, орошение (крупные)
Предметы для мытья посуды	4,0 5,0	60 30	Погружение
Посуда без остатков пищи, в т.ч. одноразовая	2,0 3,0	90 60	Погружение
Посуда столовая с остатками пищи, в т.ч. одноразовая	4,0 5,0	90 60	Погружение
Посуда лабораторная и аптечная (пробирки, пипетки, предметные стекла), резиновые груши, шланги, в т.ч. одноразовые	4,0 5,0	90 60	Погружение
Уборочный материал (ерши, щётки, ветошь), инвентарь, МОПы	4,0 5,0	60 30	Замачивание, протирание
Предметы ухода за больными	4,0 5,0	90 60	Погружение или протирание
Медицинские изделия	3,0 5,0	90 60	Погружение
Медицинские отходы: перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, бинты, белье однократного применения	3,0 4,0 5,0	120 90 60	Замачивание
Медицинские изделия однократного применения	3,0 5,0	90 60	Погружение
Обработка воздуха помещений	2,0	30	Распыление

Таблица 10. Режимы дезинфекции объектов средством «АБСОЛЮЦИД лайт» при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях.

Профиль учреждения (отделения)	Концентрация рабочего раствора по препарату, %	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Соматические отделения ЛПО (кроме процедурного кабинета)	0,2 0,3 0,5	60 30 15	Протирание или орошение
Хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, родильные залы акушерских стационаров, лаборатории, операционные, перевязочные	2,0 3,0 4,0	60 30 15	Протирание или орошение
Туберкулезные лечебно-профилактические учреждения, пенитенциарные учреждения	14,0 18,0	120 60	Протирание или орошение
Инфекционные лечебно-профилактические учреждения*	-	-	Протирание или орошение
Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения	1,0 2,0 2,5 3,0	120 90 60 30	Протирание Орошение
Детские учреждения, учреждения социального обеспечения, коммунальные объекты	0,2 0,3 0,5	60 30 15	Протирание или орошение

Примечание: * по режиму соответствующей инфекции.

Таблица 11. Режимы профилактической дезинфекции различных объектов растворами средства «АБСОЛЮЦИД лайт» на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития и т.д.), культурных, административных объектах, офисах, предприятиях общественного питания, продовольственной торговли, промышленных рынках, общественных туалетах, детских учреждениях, учреждениях социального обеспечения, автотранспорте для перевозки пищевых продуктов.

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора препарата (по препарату), %	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности из различных материалов: линолеум, дерево не окрашенное, дерево окрашенное масляной краской, фанера, плитка кафельная и др., транспорт для перевозки	0,2 0,3 0,5 1,0	60 30 15 5	Протирание или орошение
Санитарно-техническое оборудование	0,2 0,3 0,5	60 30 15	Протирание или орошение
Посуда без остатков пищи, в т.ч. одноразовая	0,2 0,3 0,5	60 30 15	Погружение
Посуда с остатками пищи, в т.ч. одноразовая	1,0 1,5 2,0	60 30 15	Погружение

Предметы для мытья посуды	1,0	60	Погружение
	1,5	30	
	2,0	15	
Поверхности кухонного оборудования; клеёнки скатерти	0,2	60	Протирание
	0,3	30	
	0,5	15	
	1,0	5	
Кухонное оборудование, инвентарь (доски разделочные, ножи, мясорубки, миксеры и др.)	0,2	60	Протирание или погружение
	0,3	30	
	0,5	15	
Игрушки, спортивный инвентарь, средства личной гигиены (из пластмассы, резины, металла)	0,2	60	Протирание или погружение
	0,3	30	
	0,5	15	
Предметы ухода за больными	0,3	60	Протирание или погружение
	0,5	30	
	1,0	15	
Уборочный материал (ерши, щётки, ветошь), инвентарь	1,0	60	Погружение, протирание, замачивание
	1,5	30	
	2,0	15	

Таблица 12. Режимы профилактической дезинфекции различных объектов (бани, бассейны, сауны, культурно-оздоровительные комплексы, спорткомплексы, косметические салоны, салоны красоты, салярии, санпропускники и др.) растворами средства «АБСОЛЮЦИД лайт»

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора препарата (по препарату), %	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности из различных материалов: линолеум, дерево не окрашенное, дерево окрашенное масляной краской, фанера, плитка кафельная и др.	1,0	120	Протирание или орошение
	2,0	90	
	2,5	60	
	3,0	30	
Санитарно-техническое оборудование	2,0	90	Протирание или орошение
	2,5	60	
	3,0	30	
Баннeе сандалии, тапочки и др. из резины, пластмасс и др. синтетических материалов	4,0	90	Погружение
	5,0	60	
	6,0	30	
Резиновые и полипропиленовые коврики, деревянные решётки	4,0	90	Погружение или протирание
	5,0	60	
	6,0	30	
Уборочный материал (ерши, щётки, ветошь), инвентарь	4,0	90	Погружение, протирание,
	5,0	60	

Таблица 13. Режимы дезинфекции медицинских и пищевых отходов растворами средства «АБСОЛЮЦИД лайт » при бактериальных (кроме туберкулеза), вирусных и грибковых инфекциях

Вид обрабатываемых изделий		Режимы обработки		
		Концентрация раствора средства по	Время дезинфекции, мин	Способ обработки
Медицинские отходы	Перевязочный материал, ватные или марлевые тампоны, марля, бинты, салфетки, одежда персонала, постельное белье и т.п.	3,0	120	Замачивание
		4,0	90	
		5,0	60	

	Изделия медицинского назначения однократного применения (шприцы, системы, перчатки, фильтры и т.п.)	3,0 4,0 5,0	60 30 15	Погружение
	Контейнеры для сбора и удаления медицинских отходов	4,0 5,0 6,0	90 60 30	Протирание или орошение
Остатки пищи		4,0 5,0 6,0	90 60 30	смешивают с рабочим раствором в соотношении 1:1. выдерживают в течение времени

Таблица 14. Режимы дезинфекции растворами средства «АБСОЛЮЦИД лайт» воздуха, систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Объект обеззараживания		Концентрация раствора (по препарату), %	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Наружная поверхность кондиционера		0,2 0,3 0,5	60 30 15	Протирание или орошение
Наружная и внутренняя поверхность передней панели кондиционера		0,2 0,3 0,5	60 30 15	Протирание или орошение
Секции центральных и бытовых кондиционеров и общеобменной вентиляции, воздухоприемник и воздухораспределители		1,0 1,5 2,0	60 30 15	Протирание или орошение
Воздушные фильтры систем кондиционирования воздуха и систем вентиляции		1,0 2,0 2,5 3,0	120 90 60 30	Погружение
Радиаторные решётки, насадки, накопители конденсата		1,0 1,5 2,0	60 30 15	Орошение или аэрозолирование
Камера очистки и охлаждения систем кондиционирования воздуха и систем вентиляции		1,0 1,5 2,0	60 30 15	Орошение или аэрозолирование
Воздуховоды		1,0 2,0 2,5 3,0	120 90 60 30	Орошение или аэрозолирование
Обработка воздуха помещений	при бактериальных инфекциях	0,2	60	Распыление
		0,3	30	
		0,5	15	
	при грибковых и анаэробных инфекциях	1,0	60	
		2,0	30	
	при вирусных инфекциях	2,0	60	
		3,0	30	
	При особо опасных инфекциях	2,5 5,0	30 15	

Таблица 15. Режимы дезинфекции куветов растворами средства «АБСОЛЮЦИД лайт»

Объект обеззараживания	Концентрация раствора (по препарату), %	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Наружные поверхности куветов	0,2	60	Протирание
	0,3	30	
	0,5	15	
Внутренние поверхности куветов	1,0	60	Протирание
	1,5	30	
	2,0	15	
Приспособления к куветам	1,0	60	Протирание
	1,5	30	
	2,0	15	

Таблица 16. Режимы обеззараживания (дезинвазии) различных объектов растворами средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при контаминации яйцами энтеробиоза.

Объект обеззараживания	Концентрация раствора (по препарату), %	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях «заразной» зоны лаборатории (пол, стены, двери), мебель (рабочий стол, индивидуальные шкафы и др.), приборы и оборудование	14,0	120	Орошение или протирание с последующей влажной уборкой
Предметы ухода за больными, твёрдые игрушки (резиновые, пластмассовые, деревянные)	18,0	60	Протирание с последующим ополаскиванием
Санитарно-техническое оборудование	16,0	120	Двукратное протирание или орошение с интервалом 15 минут
Перчатки резиновые	16,0	60	Погружение
Посуда лабораторная стеклянная	16,0	60	Погружение с последующим кипячением в 0,5% растворе средства не менее 30 минут
Посуда лабораторная пластиковая, используемая при работе с кровью и сывороткой крови	16,0	60	Погружение с экспозицией в термостате при 60°C
Банки с фекалиями, желчью, мокротой, мочой и др.	18,0	60	Погружение
Посуда из-под выделений больного (горшки)	18,0	180	Погружение
Биологические отходы	18,0	180	Заливание раствором средства в соотношении 1:2,

Уборочный инвентарь, материалы, ветошь	18,0	60	Замачивание
--	------	----	-------------

4. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «АБСОЛЮЦИД лайт» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОВМЕЩЕННОЙ С ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКОЙ

4.1. Дезинфекцию изделий медицинского назначения, в том числе совмещенную с их предстерилизационной очисткой, осуществляют в пластмассовых или эмалированных ёмкостях с закрывающимися крышками. Рекомендуется проводить обработку любых ИМН с соблюдением противоэпидемических мер с использованием средств индивидуальной защиты рук персонала.

4.2. Дезинфекцию изделий медицинского назначения, в том числе совмещенную с предстерилизационной очисткой проводят по режимам, указанным в таблицах 17-19.

Изделия медицинского назначения необходимо полностью погружать в рабочий раствор средства сразу же после их применения.

Имеющиеся в изделиях каналы и полости заполняют раствором, избегая образования воздушных пробок. Через каналы поочередно прокачивают раствор средства и продувают воздухом с помощью шприца или иного приспособления. Процедуру повторяют несколько раз до полного удаления биогенных загрязнений.

Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замковой части. Толщина слоя средства над изделиями должна быть не менее 1 см.

4.3. После окончания дезинфекционной выдержки изделия извлекают из ёмкости и отмывают их от остатков средства проточной питьевой водой не менее 5 минут, обращая особое внимание на промывание каналов (с помощью шприца или электроотсоса), не допуская попадания пропущенной воды в ёмкость с отмываемыми изделиями.

4.4. Механизированным способом обработку ИМН проводят в любых установках типа УЗО, зарегистрированных в установленном порядке («Медэл», «Ультразт», «Кристалл-5», «Серьга» и ДР), а также в моечно-дезинфицирующих машинах.

4.5. Жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним после применения у инфекционного больного подвергают процессу дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной (окончательной) очисткой, средством «АБСОЛЮЦИД лайт». При этом учитывают требования, изложенные в СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях», СП 3.1.1275-10, МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним», а также рекомендации производителей эндоскопического оборудования.

Внимание! Разрешается использование растворов средства «АБСОЛЮЦИД лайт» для обработки только тех эндоскопов, производитель которых допускает применение для этих целей средств на основе ЧАС и гуанидинов.

При использовании средства «АБСОЛЮЦИД лайт» особое внимание уделяют процессу предварительной очистки. К обработке оборудования приступают сразу после эндоскопических манипуляций (рекомендуется не допускать подсушивания биологических загрязнений).

После использования эндоскопа и инструментов к нему проводят их предварительную очистку растворами средства:

4.5.1. Видимые загрязнения с наружной поверхности эндоскопа, в том числе с объектива, удаляют тканевой (марлевой) салфеткой, смоченной в растворе средства, в направлении от блока управления к дистальному концу;

4.5.2. Каналы эндоскопа промывают средством согласно инструкции по обработке, предоставляемой производителем эндоскопа. Эндоскоп отключают от источника света и отсоса, и переносят в помещение для обработки, соблюдая противоэпидемические меры;

4.5.3. Инструменты к эндоскопу погружают в ёмкость со средством, обеспечивая полный контакт средства с ними, очищают их под поверхностью средства при помощи тканевых (марлевых) салфеток, не допуская его разбрызгивания, затем промывают инструменты водой.

4.5.4. Отмыв эндоскопов и инструментов к ним проводят: вначале проточной питьевой водой в течение 5 минут, далее дистиллированной водой в течение 1 минуты.

4.6. Перед дальнейшей обработкой эндоскоп подлежит визуальному осмотру и тесту на нарушение герметичности согласно инструкции производителя. Эндоскоп с повреждением наружной поверхности, открывающим внутренние структуры, или с нарушением герметичности не подлежит дальнейшему

использованию.

4.7. После предварительной очистки эндоскопы, прошедшие тест на герметичность, и инструменты к ним подвергают дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной (или окончательной) очисткой, с применением растворов средства, если изделия применялись у инфекционного больного. Если эндоскоп и инструменты к нему применялись не у инфекционного больного, то после процесса предварительной очистки они далее подвергаются предстерилизационной (или окончательной) очистке (см. Раздел 5).

4.8.8. Механизированную обработку эндоскопов (отечественного и импортного производства) допускается проводить в моечно-дезинфицирующих машинах, в ультразвуковых, а также в специализированных установках отечественного и импортного производства, зарегистрированных в установленном порядке (КРОНТ-УДЭ и др.), в соответствии с инструкцией по использованию установок.

4.9. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным способом указаны в таблицах 20-21.

4.10. Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают путём постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови.

Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее трех изделий). При выявлении остатков крови (положительная проба) вся группа изделий, от которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата.

4.11. Средство «АБСОЛЮЦИД лайт» применяется для дезинфекции оттисков из альгинатных, силиконовых материалов, полиэфирной смолы, зубопротезных заготовок из металлов, керамики, пластмасс и др. материалов, коррозионностойких артикуляторов.

Оттиски, зубопротезные заготовки дезинфицируют путём погружения их в рабочий раствор средства (таблица 17). По окончании дезинфекции оттиски и зубопротезные заготовки промывают проточной водой по 30 секунд с каждой стороны или погружают в ёмкость с водой на 5 минут, после чего их подсушивают на воздухе. Средство для обработки слепков используется многократно в течение недели, обрабатывая при этом не более 50 оттисков. При появлении первых признаков изменения внешнего вида раствора его следует заменить.

4.12. Отсасывающие системы в стоматологии дезинфицируют, применяя рабочий раствор средства концентрацией 2,0%, 3,0%, 4,0% объёмом 1 л, пропуская его через отсасывающую систему установки в течение 2 минут. Затем 2,0% раствор средства оставляют в ней для воздействия на 60 минут, 3,0% раствор - на 30 минут, 4,0% - на 15 минут (в это время отсасывающую систему не используют). Процедуру осуществляют 1-2 раза в день, в том числе по окончании рабочей смены. Рекомендуется использовать пеногаситель.

5. ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА «АБСОЛЮЦИД лайт» ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ, НЕ СОВМЕЩЕННОЙ С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ, ИМН И ИНСТРУМЕНТОВ К ЭНДОСКОПАМ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ, ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ И ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ (ПЕРЕД ДВУ ИЛИ СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ) ЭНДОСКОПОВ

5.1. Предстерилизационную очистку, не совмещенную с дезинфекцией, указанных изделий проводят после их дезинфекции (любым зарегистрированным на территории РФ и разрешенным к применению в ЛПУ для этой цели средством, в т.ч. средством «АБСОЛЮЦИД лайт») и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с Инструкцией (методическими указаниями) по применению данного средства.

Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, проводимые ручным способом, приведены в таблице 22; механизированным способом с использованием ультразвука (например, установки «Медэл», «Ультразэст», «Кристалл-5», «Серьга» и др.) и в моечно-дезинфицирующих машинах, а также в специализированных установках отечественного и импортного производства - в таблице 23.

5.2. Предстерилизационную или окончательную очистку эндоскопов (перед ДВУ или стерилизацией) и инструментов к ним проводят с учётом требований, изложенных в СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях», СП 3.1.1275-10, МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним», а также рекомендации производителей эндоскопического оборудования.

5.3. После предварительной очистки эндоскопы, прошедшие тест на герметичность (см. Раздел 4) и инструменты к ним подвергают предстерилизационной (или окончательной) очистке с применением растворов средства.

5.4. Эндоскоп и инструменты к нему полностью погружают в ёмкость со средством, обеспечивая его полный контакт с поверхностями изделий. Для удаления воздуха из каналов используют шприц или специальное устройство, предлагающиеся к эндоскопу.

5.5. Внешние поверхности эндоскопа и инструменты к нему очищают пол поверхностью средства при помощи тканевых (марлевых) салфеток, не допуская его разбрызгивания. При очистке принадлежностей и инструментов к эндоскопу используют, кроме того, щётки.

5.6. Для механической очистки каналов эндоскопов используют специальные щётки, соответствующие диаметрам каналов и их длине. Механическую очистку каналов осуществляют согласно инструкции производителя эндоскопов. Для промывания каналов эндоскопа и инструментов к ним средством используют шприцы или иные приспособления. Щётки после каждого использования подлежат обработке как инструменты к эндоскопам.

5.7. После механической очистки эндоскоп и инструменты к нему переносят в ёмкость с питьевой водой и отмывают от остатков средства.

5.8. Отмыв эндоскопов и инструментов к ним проводят: вначале проточной питьевой водой в течение 5 минут, далее дистиллированной водой в течение 1 минуты.

5.9. Отмытые эндоскопы и инструменты к ним переносят на чистую простыню для удаления влаги с наружных поверхностей. Влагу из каналов удаляют аспирацией воздуха при помощи шприца или специального устройства.

5.10. Режимы предварительной, предстерилизационной или окончательной очистки жёстких и гибких эндоскопов ручным и механизированным способом указаны в таблицах 24-25.

5.11. Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают путём постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови (см. п.4.10 настоящей инструкции).

ВНИМАНИЕ! Рабочие растворы средства для любой обработки различных объектов ручным способом можно применять многократно в течение срока, не превышающего 50 суток, если их внешний вид не изменился. При первых признаках изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор следует заменить. Растворы средства для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий механизированным способом в ультразвуковых установках могут быть использованы многократно в течение рабочей смены или рабочего дня, если их внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора, выпадение осадка и т.п.) раствор необходимо заменить до истечения указанного срока.

**Таблица 17. Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения растворами средства
«АБСОЛЮЦИД лайт»
при инфекциях бактериальной (исключая туберкулез), вирусной и грибковой этиологии**

Вид обрабатываемых изделий		Режим обработки		Способ обработки
		Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обеззараживания, мин	
Изделия медицинского назначения, в том числе хирургические и стоматологические инструменты из пластмасс, стекла, металлов, резин (в т.ч. колюще-режущие, вращающиеся)		Беззамковые:		Погружение
		2,0	60	
		3,0	30	
		4,0	15	
		Замковые:		
		3,0	60	
Стоматологические материалы, оттиски, зубопротезные заготовки, артикуляторы, слепочные ложки, наконечники, слюноотсосы, плевательницы		2,0	60	
		3,0	30	
		4,0	15	
Эндоскопы жёсткие и гибкие отечественного и импортного производства		2,0	60	
		3,0	30	
		4,0	15	
Инструменты к эндоскопам		2,0	60	
		3,0	30	
		4,0	15	
ИМН любого типа и материала при контаминации	анаэробными	3,0	90	
	инфекциями	5,0	60	
	особо опасными инфекциями	2,0	60	
		3,0	30	
		4,0	15	
	плесневыми грибами	4,0	120	
		6,0	60	

Таблица 18. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая инструменты к эндоскопам, хирургические и стоматологические инструменты и материалы) растворами средства «АБСОЛЮЦИД лайт» ручным способом при инфекциях бактериальной (исключая туберкулез), вирусной и грибковой этиологии

Этапы обработки	Режимы обработки		
	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Температура рабочего раствора. °С	Время выдержки/обработки, мин
Замачивание при полном погружении изделий в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов:	2,0 3,0 4,0	Не менее 18	60 30 15
<ul style="list-style-type: none"> - изделия простой конфигурации из металла и стекла, - изделия из пластика, резины, - шлифовальные боры и алмазные диски, - изделия с замковыми частями, имеющие каналы и полости, - зеркала с амальгамой, - стоматологические инструменты, в т.ч. вращающиеся, - инструменты к эндоскопам - стоматологические материалы (оттиски, зубопротезные заготовки, артикуляторы) 	3,0* 5,0*		90 60
<p>Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щётки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий - с помощью шприца:</p> <ul style="list-style-type: none"> • изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; • изделий, имеющих замковые части, каналы или полости 	В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания	Не нормируется	0,5
			1.0
Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса)	-	Не нормируется	3,0
Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса)	-	Не нормируется	2,0

Примечание: *- режим обработки при анаэробных инфекциях

Таблица 19. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая инструменты к эндоскопам, хирургические и стоматологические инструменты и материалы) растворами средства «АБСОЛЮЦИД лайт» механизированным способом (с использованием ультразвуковых установок любого типа, в моечно-дезинфицирующих машинах, а также в специализированных установках отечественного и импортного производства) при инфекциях бактериальной (исключая туберкулез), вирусной и грибковой этиологии

Этапы обработки	Режимы обработки		
	Концентрация рабочего раствора(по препарату), %	Температура рабочего раствора, °С	Время выдержки/обработки, мин
<u>Замачивание в ультразвуковой установке</u> при полном погружении изделий в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов в соответствии с программой работы установки: -изделия простой конфигурации из металла и стекла, -изделия из пластика, резины, шлифовальные боры и алмазные диски, изделия с замковыми частями, имеющие каналы и полости, -зеркала с амальгамой, -стоматологические инструменты, в т ч. вращающиеся, -инструменты к эндоскопам -стоматологические материалы (оттиски, зубопротезные заготовки, артикуляторы)	2,0 3,0 4,0	Не менее 18	30 15 5
<u>Ополаскивание</u> вне установки проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса)	Не нормируется		4,0
<u>Ополаскивание</u> вне установки дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса)	Не нормируется		2,0

Таблица 20. Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, жестких и гибких эндоскопов растворами средства «АБСОЛЮЦИД лайт» ручным способом при инфекциях бактериальной (исключая туберкулез), вирусной и грибковой этиологии

Этапы обработки	Концентрация растворов (по препарату). %	Температура рабочего раствора, °С	Время выдержки/обработки на этапе, мин
Замачивание эндоскопов при полном погружении (у не полностью погружаемых - их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнение им полостей и каналов изделия	2,0 3,0 4,0	Не менее 18	60 30 15
Мойка изделий в том же растворе, в котором проводилось замачивание: Гибкие эндоскопы: - инструментальный канал очищают щёткой для очистки инструментального канала; - внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; - наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки. Жёсткие эндоскопы: - каждую деталь моют при помощи ерша, или тканевой (марлевой) салфетки, - каналы изделий промывают при помощи шприца	В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания	Не менее 18	2,0 3,0 1,0 2,0 2,0
Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) или отмывание в ёмкости с питьевой водой	Не нормируется		4,0
Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса)	Не нормируется		1,0

Таблица 21. Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, жёстких и гибких эндоскопов растворами средства «АБСОЛЮЦИД лайт» механизированным способом (в специализированных установках, например, «КРОНТ-УДЭ», в моечно-дезинфицирующих машинах, а также в специализированных установках отечественного и импортного производства) при инфекциях бактериальной (исключая туберкулез), вирусной и грибковой этиологии

Этапы обработки	Концентрация растворов (по средству), %	Температура рабочего раствора, °С	Время выдержки/ обработки на этапе, мин.
<u>Замачивание</u> эндоскопов при полном погружении (у не полностью погружаемых – их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнение им полостей и каналов изделия, обработка в соответствии с режимом работы установки	2,0	Не менее 18	30
	3,0		15
	4,0		5
Ополаскивание вне установки проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) или отмывание в емкости с питьевой водой	Не нормируется		1,0
Ополаскивание вне установки дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса)	Не нормируется		1,0

Таблица 22. Режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (включая инструменты к эндоскопам, хирургические и стоматологические инструменты и материалы) растворами средства «АБСОЛЮЦИД лайт» ручным способом

Этапы обработки	Режим очистки		
	Температура °С	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время выдержки (мин)
<u>Замачивание</u> при полном погружении изделий в раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий: - изделия простой конфигурации из металла и стекла, - изделия из пластика, резины, - шлифовальные боры и алмазные диски, - изделия с замковыми частями, имеющие каналы и полости, - зеркала с амальгамой, - стоматологические инструменты, в т.ч. вращающиеся, - инструменты к эндоскопам - стоматологические материалы (оттиски,	Не менее 18	0,1	30
<u>Мойка</u> каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли замачивание, при помощи ерша или ватно-марлевого тампона, каналов изделий - при помощи шприца: - не имеющих замковых частей каналов и полостей (скальпели, экскаваторы, пинцеты, элеваторы, гладилки, боры твердосплавные, зеркала цельнометаллические, стоматологические материалы), кроме зеркал с амальгамой - имеющих замковые части каналы или полости (ножницы, корнцанги, зажимы, щипцы стоматологические), а также зеркал с амальгамой	Не нормируется	В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания	1,0 3,0
<u>Ополаскивание</u> проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса)	Не нормируется		3,0
<u>Ополаскивание</u> дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса)	Не нормируется		2,0

Таблица 23. Режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (включая инструменты к эндоскопам, хирургические и стоматологические инструменты и материалы) растворами средства «АБСОЛЮЦИД лайт» механизированным способом (с использованием ультразвуковых установок любого типа, в моечно-дезинфицирующих машинах, а также в специализированных установках отечественного и импортного производства)

Этапы проведения очистки	Режим очистки		
	Температура °С	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время выдержки (мин)
<p><u>Замачивание в ультразвуковой установке</u> при полном погружении изделий в раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий в соответствии с программой работы установки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изделия простой конфигурации из металла и стекла, - изделия из пластика, резины, - шлифовальные боры и алмазные диски, - изделия с замковыми частями, имеющие каналы и полости, - зеркала с амальгамой, - стоматологические инструменты, в т.ч. вращающиеся, - инструменты к эндоскопам - стоматологические материалы (оттиски, зубопротезные заготовки, артикуляторы) 	Не менее 18	0,1	15
<u>Ополаскивание</u> вне установки проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса)	Не нормируется		4,0
<u>Ополаскивание</u> вне установки дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса)	Не нормируется		2,0

Таблица 24. Режимы предварительной, предстерилизационной (или окончательной) очистки эндоскопов растворами средства «АБСОЛЮЦИД лайт» ручным способом

Этапы очистки	Концентрация растворов (по препарату), %	Температура рабочего раствора, °С	Время выдержки/обработки на этапе, мин.
<u>Замачивание</u> эндоскопов при полном погружении (у не полностью погружаемых - их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнение им полостей и каналов изделия	0,1	Не менее 18	15
Мойка изделий в том же растворе, в котором проводилось замачивание: Гибкие эндоскопы: инструментальный канал очищают щёткой для очистки инструментального канала; внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки. Жёсткие эндоскопы: каждую деталь моют при помощи ерша, или тканевой (марлевой) салфетки, каналы изделий промывают при помощи шприца.	В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания	Не менее 18	2,0 3,0 1,0 2,0 2,0
Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) или отмывание в ёмкости с питьевой водой	Не нормируется		4,0
Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса)	Не нормируется		1,0

Таблица 25. Режим предварительной, предстерилизационной (или окончательной) очистки эндоскопов растворами средства «АБСОЛЮЦИД лайт» механизированным способом (в специализированных установках, например «КРОНТ-УДЭ», в моечно-дезинфицирующих машинах, а также в специализированных установках отечественного и импортного производства)

Этапы очистки	Концентрация растворов (по средству), %	Температура рабочего раствора, °С	Время выдержки/обработки на этапе, мин.
<u>Замачивание</u> эндоскопов при полном погружении (у не полностью погружаемых - их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнение им полостей и каналов изделия в соответствии с режимом работы установки	0,1	Не менее 18	15

Ополаскивание вне установки проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) или отмывание ёмкости с питьевой водой	Не нормируется	4,0
Ополаскивание вне установки стерильной дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса)	Не нормируется	1,0

6. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «АБСОЛЮЦИД лайт» ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ КРОВИ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЫДЕЛЕНИЙ (МОЧИ, ФЕКАЛИЙ, МОКРОТЫ. РВОТНЫХ МАСС)

6.1. Дезинфекция крови и биологических выделений осуществляется путём их смешивания с рабочими растворами дезинфицирующего средства «АБСОЛЮЦИД лайт» в соответствии с режимами, приведенными в таблице 26.

6.2. Жидкие отходы, смывные воды (включая эндоскопические смывные воды), кровь, сыворотку, выделения больного (мокрота, рвотные массы, моча, фекалии и пр.) смешивают с рабочим раствором необходимой для дезинфекции концентрации в соотношении 1 часть отходов на 1 часть раствора

6.3. Дезинфицирующий раствора заливается непосредственно в ёмкость или на поверхность, где находится биологический материал. Далее полученная смесь выдерживается согласно используемому режиму' обеззараживания. Во время дезинфекции в емкости, последняя должна быть закрыта крышкой. Все работы персоналу проводить в резиновых перчатках, соблюдая противоэпидемические правила.

6.4. После окончания дезинфекционной выдержки смесь обеззараженной крови (выделений) и рабочего раствора средства подвергается утилизации как медицинские отходы с учётом требований СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней» СанПнН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

6.5. При отсутствии других возможностей утилизации смесь обеззараженной крови (выделений) и рабочего раствора средства может быть слита в канализацию.

6.6. Лабораторную посуду или поверхность, на которой проводили дезинфекцию и сбор обеззараженного биологического материала, обрабатывают 4-6% раствором средства «АБСОЛЮЦИД лайт» в течение 30-90 минут способом погружения (посуда) или протирания (поверхности). Затем лабораторную посуду или поверхности споласкивают в проточной воде или протирают чистой ветошью, смоченной водой.

6.7. В соответствии с действующими документами непригодную для использования донорскую кровь и препараты крови утилизируют с использованием автоклавирования. Однако кровь со сгустками, донорскую кровь и препараты крови не зараженную, но с истекшим сроком годности допускается дезинфицировать путём смешивания с 5% рабочим раствором средства в соотношении 1 часть крови на 2 части раствора. Смесь выдерживают в течение 60 минут и утилизируют с учетом требований СанПиН 2.1.7.2790-10 СанПиН 2.1.3684-21.

Медицинские пиявки после проведения гирудотерапии погружают в 5% рабочий раствор средства на время экспозиции 60 минут, затем утилизируются с учётом требований СанПиН 2.1.7.2790-10 СанПиН 2.1.3684-21.

Таблица 26. Режимы дезинфекции крови и биологических выделений растворами средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при инфекциях бактериальной (исключая туберкулез), вирусной и грибковой (включая кандидозы, дерматофитии) этиологии.

Объект дезинфекции	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время выдержки, мин	Способ обеззараживания
Жидкие отходы, кровь, сыворотка, смывные воды (включая эндоскопические смывные воды), выделения больного (мокрота, моча, фекалии, рвотные массы и прочее), отходы из микробиологических лабораторий (вакцины, культуры штаммы, вирусологический материал и т.п.).	3,0 4,0 5,0	120 90 60	Смешивание крови или биологических выделений с рабочим раствором средства в соотношении 1:1

7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 7.1. К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет, а также лица с повышенной чувствительностью к химическим веществам и страдающие аллергическими заболеваниями.
- 7.2. Избегать попадания средства в глаза и на кожу.
- 7.3. Работу со средством проводить в резиновых перчатках.
- 7.4. Ёмкости с раствором средства должны быть плотно закрыты.
- 7.5. Дезинфекцию поверхностей способом протирания возможно проводить в присутствии людей без средств защиты органов дыхания.
- 7.6. Обработку поверхностей растворами средства способом орошения проводить в отсутствие пациентов с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В и глаз - герметичными очками.
- 7.7. Посуду после её обработки рабочим раствором необходимо промыть проточной водой не менее 3 минуты.
- 7.8. При проведении работ со средством следует строго соблюдать правила личной гигиены. Запрещается пить, курить, принимать пищу на рабочем месте. После работы вымыть лицо и руки с мылом.
- 7.9. Хранить средство следует в местах, недоступных детям, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств.
- 7.10. Не использовать по истечении срока годности.
- 7.11. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию!

8. МЕРЫ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ.

- 8.1. Средство малоопасно, но при применении способом орошения и при неосторожном приготовлении его растворов при несоблюдении мер предосторожности возможны случаи отравления, которые выражаются в явлениях раздражения органов дыхания (сухость, першение в горле, кашель), глаз (слезотечение, резь в глазах) и кожных покровов (гиперемия, отечность).
- 8.2. При попадании средства в глаза немедленно промыть их проточной водой в течение 10-15 минут или 2% раствором соды, затем закапать сульфацил натрия в виде 30% раствора. При необходимости обратиться к врачу.
- 8.3. При попадании средства на кожу вымыть её большим количеством воды.
- 8.4. При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды и 10-20 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.
- 8.5. При раздражении органов дыхания пострадавшего вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. Дать тёплое питье (молоко или воду). При необходимости обратиться к врачу.

9. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ

- 9.1. Средство выпускается в полимерной таре вместимостью от 1л до 30л, полимерные бочки по 200л.
- 9.2. Средство транспортировать всеми доступными видами транспорта (при температуре от - 400С до + 400С), в упаковке производителя, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, гарантирующими сохранность продукции и тары. При низких температурах средство замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства. В соответствии с ГОСТ 19433-88 не является опасным грузом.
- 9.3. Хранить средство в прохладном месте в закрытых ёмкостях вдали от источников тепла, избегая попадания прямого солнечного света, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.
- 9.4. Срок годности средства – 7 лет в не вскрытой упаковке изготовителя.
- 9.5. В аварийных ситуациях при случайной утечке или разливе средства его уборку следует проводить, используя спецодежду, резиновый фартук, резиновые сапоги и средства индивидуальной защиты - кожи рук (резиновые перчатки), глаз (защитные очки).
Пролившееся средство следует адсорбировать удерживающим жидкость веществом (песок, опилки, ветошь, силикагель), собрать и отправить на утилизацию. Остатки средства смыть большим количеством воды. При небольшом проливе смыть средство смыть в канализацию водой.
- 9.6. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

**10. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
СРЕДСТВА «АБСОЛЮЦИД лайт».**

10.1 Контролируемые параметры и нормы

По показателям качества согласно спецификации средство должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 27.

**Таблица 27. Показатели качества дезинфицирующего средства с моющим действием
«АБСОЛЮЦИД лайт»**

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ 20.20.14 - 002-45105860-2022	Методы контроля по ТУ 20.20.14 - 02-45105860-2022
1.	Внешний вид, цвет и запах	прозрачная жидкость от бесцветного до желтого цвета со слабым специфическим запахом и/или за пахом отдушки	По п. 5.2
2	Показатель активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора	7,8±1,0	По п. 5.3
3	Массовая доля смеси алкилдиметилбензиламмоний хлорида и алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорида, %	3,0±0,5	По п. 5.4
4	Массовая доля полигексаметилен гуанидина гидрохлорида, %	1,0±0,2	По п. 5.5

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Дезинфекция в общеобразовательных учреждениях (включая детские дошкольные и школьные образовательные учреждения)

1. Дезинфекцию поверхностей помещений, оборудования, посуды, инвентаря и прочих объектов в образовательных учреждениях (включая детские дошкольные и школьные образовательные учреждения) проводят в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, регулирующими деятельность этих объектов (СанПиН 2.4.2.2821-10 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений").
2. Места общего пользования туалеты, буфет, столовая и медицинский кабинет образовательных учреждений (включая детские дошкольные образовательные учреждения) всегда убирают с использованием дезинфицирующих средств.
3. Санитарно-техническое оборудование подлежит ежедневному обеззараживанию независимо от эпидситуации. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей двукратно обрабатывают 0,2% раствором средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при экспозиции 60 минут, 0,3% раствором средства при экспозиции 30 минут или 0,5% раствором средства при экспозиции 15 минут, норма расхода средства 100мл/м².
4. Раковины, унитазы, писсуары обрабатывают с помощью квачей, щёток или ветоши 0,2%, 0,3%, 0,5% раствором средства «АБСОЛЮЦИД лайт». Норма расхода средства составляет 100мл/м². По окончании дезинфекции сантехнику промывают водой.
5. Уборку столовой проводят после каждого посещения её детьми (завтрак, обед, полдник). После каждого приема пищи столы моют горячими растворами моющих средств.
6. Во время карантина мытье столовой посуды, стеклянной посуды и столовых приборов ручным способом осуществляется по режиму соответствующей инфекции (таблицы 2-7) следующим образом: после механического удаления остатков пищи, посуду погружают в 1-ое гнездо ванны с рабочим раствором «АБСОЛЮЦИД лайт», по окончании дезинфекционной выдержки посуду перемещают во 2-ое гнездо ванны и промывают с помощью щётки или ерша проточной питьевой водой не менее 3 минут, затем посуду просушивают на специальных полках или решетках.
7. Мочалки, губки для мытья посуды и ветошь для протирки столов по окончании уборки замачивают в 1,0% рабочем растворе средства «АБСОЛЮЦИД лайт» на 60 минут, 1,5% растворе на 30 минут или в 2% растворе на 15 минут, затем прополаскивают и сушат. Во время карантина мочалки, губки для мытья посуды и ветошь для протирки столов дезинфицируют по режиму соответствующей инфекции, в соответствии с таблицами 2-7.
8. Остатки пищи обеззараживают путем смешивания с рабочим раствором дезинфицирующего средства «АБСОЛЮЦИД лайт» в соотношении 1:1. Дезинфицирующий раствор заливается непосредственно в ёмкость. Далее полученная смесь выдерживается согласно используемому режиму обеззараживания (таблица 13) и утилизируется. Во время дезинфекции в ёмкости, последняя должна быть закрыта крышкой.
9. Обеззараживание помещения, предметов обстановки, поверхности оборудования и предметов ухода за больными в медицинском кабинете проводятся в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции объектов при бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза) в таблице 2.
10. В период карантина ежедневному обеззараживанию подлежат все помещения, где находились дети из класса (группы) с установленным карантином, дезинфекция проводится по режиму соответствующей инфекции (таблицы 2-7). При проведении дезинфекции особое внимание уделяют обработке объектов, играющих решающую роль в передаче данной инфекции. При капельных инфекциях – частое проветривание классов (на каждой перемене), тщательное удаление пыли в помещениях, обеззараживание посуды; при кишечных инфекциях – обеззараживание посуды, игрушек, поверхностей обеденных столов, туалетов.
11. В помещениях, где оборудованы уголки живой природы, проводят ежедневную влажную уборку, чистку клеток, кормушек, замену подстилок, мытье поилок и смену в них воды. Один раз в две недели клетки, кормушки, поилки необходимо дезинфицировать 1,0% раствором средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при экспозиции 60 минут или 1,5% раствором средства при экспозиции 30 минут или 2,0% раствором при экспозиции 15 мин. методом протирания, норма расхода средства 100мл/м² с последующей промывкой проточной водой и высушиванием. После дезинфекции в клетку кладут чистую подстилку и корм.
12. Один раз в месяц проводят генеральную уборку всех помещений в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции объектов при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях (таблица 10).
13. Дезинфекцию мусоросборников после опорожнения, помойных ям, мусорных ящиков, мусорных контейнеров проводят методом орошения 0,2% раствором средства при экспозиции 60 минут, 0,3% раствором при экспозиции 30 минут или 0,5% раствором средства при экспозиции 15 минут. Норма расхода средства составляет 150мл/м².

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Дезинфекция на предприятиях общественного питания

1. Дезинфекция на предприятиях общественного питания (столовых, ресторанах, кафе, барах, буфетах, раздаточных пунктах) проводится в соответствии с санитарными правилами и нормативами, регулирующими их деятельность (СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»)

2. Дезинфицирующее средство с моющим действием «АБСОЛЮЦИД лайт» предназначено для:

- дезинфекции, совмещенной с мойкой (после предварительной механической очистки от пищевых остатков) поверхностей помещений, мебели, оборудования, инвентаря, тары на предприятиях общественного питания;

- дезинфекции после предварительной мойки обрабатываемых объектов моющими средствами, разрешенными для использования на предприятиях пищевой промышленности.

3. Дезинфекция поверхностей помещений, мебели, оборудования, инвентаря, тары на предприятиях общественного питания проводят методом орошения, протирания или погружения (мелкий инвентарь).

4. Дезинфекцию после предварительной мойки поверхностей помещений (пол, стены, двери и т.д.), жесткой и полужесткой мебели (столы, стулья, кресла, диваны, стеллажи, витрины и т.д.) в залах приема пищи, буфетах, раздаточных пунктах, складских и бытовых помещениях (сервизные, бельевые, гардеробные), кладовых овощей, солений, полуфабрикатов проводят 0,2% раствором средства при экспозиции 60 минут, 0,3% раствором средства при экспозиции 30 минут, 0,5% раствором средства при экспозиции 15 минут, норма расхода средства 100мл/м².

Дезинфекцию, совмещенную с мойкой, вышеперечисленных объектов проводят аналогично. Норма расхода средства - 100мл/м².

После экспозиции поверхности, непосредственно контактирующие с пищевыми продуктами, дважды протирают ветошью или тканевой салфеткой, обильно смоченной проточной водой.

Смывание рабочих растворов средства с поверхностей, не контактирующих с пищей (пол, стены, двери, стулья и пр.), не требуется.

5. Дезинфекцию после предварительной мойки поверхностей производственных помещений (мясного, рыбного, птицеполюевого, овощного, доготовочного, заготовочного, горячего, холодного, моечного и др. цехов), технологического оборудования (производственных столов, фаршевых машин, тележек, транспортеров, овощемоек, овощечисток, льдогенераторов и др.) холодильного оборудования, дефростеров, производственных и моечных ванн, инвентаря (разделочных досок, ножей, пил, подносов, лотков и др.) проводят 0,2% раствором средства при экспозиции 60 минут, 0,3% раствором средства при экспозиции 30 минут или 0,5% раствором средства при экспозиции 15 минут; норма расхода средства 100мл/м².

Дезинфекцию, совмещенную с мойкой, вышеперечисленных объектов проводят аналогично. Норма расхода средства составляет 100мл/м².

После истечения дезинфекционной выдержки осуществляют ополаскивание водой от остатков дезинфицирующего раствора в течение 3-5 минут объектов, непосредственно контактирующих с пищевым сырьем.

С остальных объектов смывание дезинфектанта не требуется.

6. Дезинфекцию производственных помещений кондитерских цехов (помещения для зачистки масла, помещения для обработки яиц с отделением для приготовления яичной массы с холодильным оборудованием для ее хранения, помещения для приготовления и разделки теста, отделения приготовления отделочных полуфабрикатов, отделение приготовления крема с холодильным оборудованием, помещения отделки кондитерских изделий с холодильной камерой, экспедицию кондитерских изделий с холодильной камерой, моечную внутрицеховой тары, моечную и стерилизационную кондитерских мешков, наконечников, мелкого инвентаря, технологического оборудования, находящегося в этих помещениях, крупного и мелкого инвентаря) проводят 0,2% раствором средства при экспозиции 60 минут, 0,3% раствором средства при экспозиции 30 минут или 0,5% раствором средства при экспозиции 15 минут; норма расхода средства 100мл/м².

Дезинфекцию, совмещенную с мойкой, вышеперечисленных объектов проводят аналогично. Норма расхода средства составляет 100мл/м².

Смывание рабочих растворов средства с поверхностей, не контактирующих с пищей, не требуется.

После истечения дезинфекционной выдержки осуществляют ополаскивание водой от остатков дезинфицирующего раствора в течение 3-5 минут объектов, непосредственно контактирующих с пищевым сырьем.

С остальных объектов смывание дезинфектанта не требуется.

7. Обработку скорлупы яиц (сырых и варёных) осуществляют в отведенном месте в специальных промаркированных ёмкостях в соответствии «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и

пищевого сырья «СП 2.3.6.1079-01», утверждённых Минздравом РФ 08.11.2001; СанПиН 2.3.5.021-94 «Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли, утверждённых Госкомсанэпиднадзором России 30.12.1994.

7.1. Дезинфекция яиц без видимых загрязнений скорлупы:

Обработка яиц, используемых для приготовления блюд, осуществляется в отведенном месте в специальных промаркированных ёмкостях в следующей последовательности: отсортированные яйца (проверенные на отсутствие повреждений скорлупы), без видимых загрязнений погружаются в 0,3% или 0,5% растворы средства на 10 минут или 5 минут соответственно, после чего их ополаскивают холодной проточной водой. Обработка проводится при температуре 18-30°C. Чистое яйцо выкладывают в чистую промаркированную посуду. При проведении совмещенной мойки и дезинфекции поверхности скорлупы яиц рабочий раствор используют однократно.

7.2. Дезинфекция яиц с загрязненной скорлупой:

Для совмещения мойки и дезинфекции в одном этапе яйца с загрязненной скорлупой устанавливают в ящиках, пластмассовых прокладках или другой таре на решетки в ванну для замачивания в 0,5% или 1,0% растворе средства при температуре 18-30 °C на 10 минут или 5 минут соответственно. По истечении времени экспозиции яйца очищают щётками в том же растворе, после чего направляют во вторую секцию для ополаскивания, где яйца ополаскивают проточной водой с температурой 18-30°C до полного смыывания следов дезинфектанта (не менее 1 минут).

При проведении совмещенной мойки и дезинфекции поверхности скорлупы яиц рабочий раствор используют однократно.

7.3. Обработанные яйца ставят на решетки стеллажи на 15-20 минут для стекания воды и подсушивания

7.4. Чистое яйцо выкладывают в чистую промаркированную посуду. Режимы обеззараживания куриных яиц рабочими растворами средства приведены в таблице 2.

7.5. Полноту смываемости остатков раствора средства «АБСОЛЮЦИД лайт» определяют по наличию (отсутствию) четвертичных аммонийных соединений в смывных водах и на поверхности оборудования. Контроль можно проводить с помощью индикаторных полосок «Молконт-ЧАС» и индикаторных салфеток «Дезиконт-ЧАС», погружая индикатор в смывную воду и прикладывая к поверхности обрабатываемого объекта.

8. Генеральную санитарную обработку проводят согласно внутреннему распорядку предприятия, но не реже одного раза в месяц. Дезинфекцию в залах приема пищи, буфетах, раздаточных пунктах, складских и бытовых помещениях (сервизные, бельевые, гардеробные), кладовых овощей, солений, полуфабрикатов проводят 0,1% раствором средства при экспозиции 60 минут, 0,3% раствором средства при экспозиции 30 минут или 0,5% раствором средства при экспозиции 15 минут. Дезинфекцию в производственных помещениях проводят 0,1% раствором средства при экспозиции 60 минут, 0,3% раствором средства при экспозиции 30 минут или 0,5% раствором средства при экспозиции 15 минут

9. Туалеты по мере необходимости и после окончания работы предприятия тщательно очищают, промывают и дезинфицируют путём протирания 0,2%, 0,3%, 0,5% раствором средства. Норма расхода средства составляет 100мл/м². При каждой уборке туалетов протирают отдельно выделенной салфеткой, смоченной в 0,2%, 0,3%, 0,5% растворах средства, вентили водопроводных кранов, а также ручки и затворы дверей, спусковые ручки и другие поверхности, которых касаются руки человека при посещении туалета.

10. Уборочный инвентарь погружают в раствор средства, материал (губки, салфетки, ветошь) замачивают в 1,0% растворе средства на 60 минут, 1,5% раствор на 30 минут, в 2,0% растворе средства на 15 минут. По окончании дезинфекционной выдержки прополаскивают водой и высушивают.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Дезинфекция на предприятиях продовольственной торговли

1. Дезинфекция на предприятиях продовольственной торговли, включая крупные супермаркеты, рынки, плодоовощные базы, склады, овоще- и фруктохранилища, а также стационарные (палатки, киоски, автофургоны, павильоны) и передвижные (тележки, корзины, лотки, автолавки, автоприцепы и т.д.) объекты мелкорозничной сети и транспорт для перевозки пищевых продуктов проводится в соответствии с санитарными правилами и нормативами, регулирующими их деятельность (СанПиН 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»).

2. Дезинфицирующее средство с моющим действием «АБСОЛЮЦИД лайт» предназначено для:

- дезинфекции, совмещенной с мойкой (после предварительной механической очистки от пищевых остатков), на предприятиях продовольственной торговли и на транспорте для перевозки пищевых продуктов;
- дезинфекции после предварительной мойки предприятий продовольственной торговли и транспорта для перевозки пищевых продуктов моющими средствами, разрешенными для использования на предприятиях

пищевой промышленности.

3. Дезинфекция поверхностей помещений, торгового (весов, прилавков, витрин, фасовочных агрегатов и

др.) и технологического оборудования (фаршевых машин, пил, столов для разделки мяса, рыбы, решеток, стеллажей, подтоварников и т.д., раковин и производственных ванн), холодильного оборудования, тары, посуды, крупного (подтоварников, тележек, транспортеров) и мелкого инвентаря (лотков, подносов, ножей, разделочных досок), в отделах скоропортящихся продуктов (мясном, рыбном, молочном, колбасном, кулинарном, кондитерском и др.) проводится методом орошения, протирания или погружения (мелкий инвентарь) 0,2% раствором средства при экспозиции 60 минут, 0,3% раствором средства при экспозиции 30 минут, 0,5% раствором средства при экспозиции 15 минут, норма расхода средства 100мл/м².

Дезинфекцию, совмещенную с мойкой, вышеперечисленных объектов проводят аналогично. Норма расхода средства - 100мл/м².

После экспозиции поверхности, непосредственно контактирующие с пищевыми продуктами, дважды протирают ветошью или тканевой салфеткой, обильно смоченной проточной водой. Мелкий инвентарь отмывают от остатков средства проточной водой. Смывание рабочих растворов средства с поверхностей, не контактирующих с пищей, (пол, стены, двери, и пр.), не требуется.

4. Дезинфекция поверхностей помещений, торгового оборудования (платформ весов, прилавков, витрин, стеллажей, фасовочных агрегатов и др.), инвентарной тары, мелкого и крупного оборудования в бакалейных, хлебобулочных и пр. отделах проводится методом орошения, протирания или погружения (мелкий инвентарь) 0,2% раствором средства при экспозиции 60 минут, 0,3% раствором средства при экспозиции 30 минут, 0,5% раствором средства при экспозиции 15 минут, норма расхода средства 100мл/м².

Дезинфекцию, совмещенную с мойкой, вышеперечисленных объектов проводят аналогично. Норма расхода средства - 100мл/м².

После экспозиции поверхности, непосредственно контактирующие с пищевыми продуктами, дважды протирают ветошью или тканевой салфеткой, обильно смоченной проточной водой. Пищевое оборудование ополаскивают водой от остатков дезинфицирующего раствора в течение 3-5 минут. Смывание рабочих растворов средства с поверхностей, не контактирующих с пищей, (пол, стены, двери, и пр.), не требуется.

5. Профилактическую, текущую и вынужденную дезинфекцию поверхностей помещений, стеллажей, инвентаря, тары на плодоовощных базах, складах, овоще- и фруктохранилищах для предупреждения развития гнилостных бактерий проводят после механической очистки 0,2% раствором средства при экспозиции 60 минут, 0,3% раствором средства при экспозиции 30 минут, 0,5% раствором средства при экспозиции 15 минут.

Поверхности, пораженные плесенью, предварительно очищают и просушивают, а затем двукратно с интервалом 15 минут обрабатывают способом протирания или орошения 4% раствором средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при экспозиции 120 мин, 6% раствором при экспозиции 60 минут, 8% раствором при экспозиции 30 минут. Для предотвращения роста плесени через 1 месяц рекомендуется повторить обработку.

6. Дезинфекцию после предварительной мойки внутренней поверхности кузова транспорта для перевозки пищевых продуктов (включая охлаждаемый и изотермический транспорт) проводят 0,2% раствором средства при экспозиции 60 минут, 0,3% раствором средства при экспозиции 30 минут, 0,5% раствором средства при экспозиции 15 минут, норма расхода средства 100мл/м².

Дезинфекцию, совмещенную с мойкой, вышеперечисленных объектов проводят аналогично. Норма расхода средства - 100мл/м².

По окончании дезинфекции внутренняя поверхность кузова промывается водой из шланга, просушивается и проветривается. Дезинфекция транспорта производится по мере необходимости, но не реже 1 раза в 10 дней.

7. Генеральную санитарную обработку предприятий продовольственной торговли проводят согласно внутреннему распорядку предприятия, но не реже одного раза в неделю. Дезинфекция в отделах скоропортящихся продуктов (мясном, рыбном, молочном, колбасном, кулинарном, кондитерском и др.) проводится 0,2% раствором средства при экспозиции 60 минут, 0,3% раствором средства при экспозиции 30 минут, 0,5% раствором средства при экспозиции 15 минут.

Дезинфекция в бакалейных, хлебобулочных и пр. отделах проводится методом орошения, протирания или погружения (мелкий инвентарь) 0,2% раствором средства при экспозиции 60 минут, 0,3% раствором средства при экспозиции 30 минут, 0,5% раствором средства при экспозиции 15 минут.

8. Туалеты по мере необходимости и после окончания работы предприятия тщательно очищают, промывают и дезинфицируют путём протирания 0,2%, 0,3%, 0,5% раствором средства. Норма расхода средства составляет 100мл/м². При каждой уборке туалетов протирают отдельно выделенной салфеткой, смоченной в 0,2%, 0,3%, 0,5% растворе средства, вентили водопроводных кранов, а также ручки и затворы дверей, спусковые ручки и другие поверхности, которых касаются руки человека при посещении туалета.

9. Уборочный инвентарь погружают в раствор средства, материал (губки, салфетки, ветошь) замачивают в 1,0% растворе средства на 60 минут, 1,5% раствор на 30 минут, в 2,0% растворе средства на 15 минут.

По окончании дезинфекционной выдержки прополаскивают водой и высушивают.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Дезинфекция в парикмахерских, салонах красоты, косметических и массажных салонах

1. Дезинфекцию поверхностей помещений, оборудования, инвентаря в парикмахерских, салонах красоты, косметических и массажных салонах, СПА-центрах проводят в соответствии с санитарногигиеническими требованиями, регулирующими деятельность этих объектов (СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги»).
2. Профилактическую дезинфекцию, совмещенную с мойкой, поверхностей помещений (пол, стены, плинтусы), дверей, мебели, поверхностей аппаратов и приборов парикмахерских залов, косметических кабинетов, массажных кабинетов и туалетных комнат, педикюрных и маникюрных кабинетов проводят 1% раствором средства при экспозиции 120 минут, 2% раствором средства при экспозиции 90 минут, 2,5% раствором средства при экспозиции 60 минут, 3% раствором средства при экспозиции 30 минут. Норма расхода средства 100 мл/м². Смывание раствора с поверхностей после обработки не требуется.
3. Подушка, подкладываемая под ногу, при проведении педикюра протирается губкой, салфеткой или ветошью, смоченной 1% раствором средства при экспозиции 120 минут, 2% раствором средства при экспозиции 90 минут, 2,5% раствором средства при экспозиции 60 минут, 3% раствором средства при экспозиции 30 минут. Срок годности рабочих растворов – 50 суток.
4. Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос моют и дезинфицируют в растворах средства 1%, 2% и 2,5%, 3% при экспозиции 120 минут, 90 минут, 60 минут и 30 минут соответственно.
5. Дезинфекцию и мойку, совмещенную с дезинфекцией, ванн для ног, ванночек для рук, душевых кабин, ванн, проводят после каждого клиента 1%, 2% и 2,5%, 3% раствором средства, нанесенным на губку, салфетку, ветошь или щетку. Экспозиция 120 минут, 90 минут, 60 минут или 30 минут соответственно. Срок годности рабочих растворов – 50 суток.
6. Инструменты, используемые для манипуляций, при которых возможно повреждение кожных покровов или слизистых оболочек (маникюр, педикюр, татуаж, пирсинг, пилинг, косметические услуги) после каждого клиента без предварительного промывания водой помещают в дезинфицирующий раствор. Дезинфекцию осуществляют по режимам, применяемым при вирусных инфекциях (таблица 4). После окончания дезинфекции инструменты подвергают предстерилизационной очистке и стерилизации.
7. Дезинфекцию и мойку, совмещенную с дезинфекцией, соляриев проводят после каждого клиента 1%, 2% и 2,5%, 3% раствором средства, нанесенным на губку, салфетку, ветошь или щетку. Экспозиция 120 минут, 90 минут, 60 минут или 30 минут соответственно.
8. Дезинфекция и мойка поверхностей помещений и оборудования при проведении генеральных уборок в парикмахерских залах, косметических кабинетах, массажных кабинетах и туалетных комнатах, в педикюрных и маникюрных кабинетах проводят 1% раствором средства при экспозиции 120 минут, 2% раствором средства при экспозиции 90 минут, 2,5% раствором средства при экспозиции 60 минут, 3% раствором средства при экспозиции 30 минут.
9. Инвентарь, используемый для уборки всех помещений, педикюрного и маникюрного кабинета, погружают в раствор средства, материал (губки, салфетки, ветошь) замачивают в 4% растворе средства на 90 минут, 5% растворе средства на 60 минут.

По окончании дезинфекционной выдержки прополаскивают водой и высушивают.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Дезинфекция в бассейнах и аквапарках

1. Дезинфекцию поверхностей помещений, оборудования, инвентаря и санитарную обработку плавательных ванн в бассейнах и аквапарках средством «АБСОЛЮЦИД лайт» проводят в соответствии с санитарными правилами и нормативами, регулирующими их деятельность (СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» и СанПиН 2.1.2.1331-03 «Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков»).
2. Ежедневную профилактическую дезинфекцию или дезинфекцию, совмещенную с мойкой, поверхностей помещений туалетов, душевых, раздевалных, обходных дорожек, скамеек, лежаков, дверных ручек, поручней и прочего оборудования и инвентаря в бассейнах и аквапарках проводят способом протирания или орошения 1% раствором средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при экспозиции 120 минут, 2% раствором средства при экспозиции 90 минут, 2,5% раствором средства при экспозиции 60 минут, 3% раствором средства при экспозиции 30 минут. Норма расхода средства 100 мл/м². Смывание раствора с поверхностей после каждой обработки не требуется.
3. Поверхности, пораженные плесенью, предварительно очищают и просушивают, а затем двукратно с интервалом 15 минут обрабатывают способом протирания или орошения 4% раствором средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при экспозиции 120 мин, 6% раствором при экспозиции 90 минут, 8% раствором

при экспозиции 30 минут. Для предотвращения роста плесени через 1 месяц рекомендуется повторить обработку.

4. Дезинфекция и мойка поверхностей помещений и оборудования при проведении генеральных уборок в бассейнах, аквапарках проводятся 1% раствором средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при экспозиции 120 минут, 2% раствором средства при экспозиции 90 минут, 2,5% раствором средства при экспозиции 60 минут, 3% раствором средства при экспозиции 30 минут.

5. Дезинфекция и дезинфекция, совмещенная с мойкой, ванн бассейнов, проводимая после полного слива воды и механической чистки, осуществляется 1% раствором средства «АБСОЛЮЦИД лайт», 2%, 2,5%, 3% раствором средства способом двукратного орошения с расходом дезинфектанта 300 мл/м². Смыв дезинфицирующего раствора производится не ранее, чем через 120 минут, 90 минут, 60 минут и 30 минут соответственно.

6. Перед дезинфекционной обработкой обросших стенок ванн бассейнов рекомендуется их предварительно очистить с помощью кислотных моющих средств.

7. Уборочный инвентарь погружают в раствор средства, материал (губки, салфетки, ветошь) замачивают в 4% растворе средства на 90 минут, 5% растворе средства на 60 минут. По окончании дезинфекционной выдержки прополаскивают водой.

8. Банные сандалии и тапочки из полимерных материалов дезинфицируют способом погружения в 4% растворе средства на 90 минут, 5% растворе средства на 60 минут, 6% растворе средства на 30 минут, препятствуя их всплытию. После дезинфекции их ополаскивают водой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Дезинфекция на объектах банного обслуживания

1. Дезинфекцию и дезинфекцию, совмещенную с мойкой, поверхностей помещений, оборудования и инвентаря объектов банного обслуживания (бань, саун, санитарных пропускников, стационарных и передвижных обмывочно-дезинфекционных камер) проводят средством «АБСОЛЮЦИД лайт» в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, регулирующими деятельность этих объектов (СанПиН №982-72 «Устройство, оборудование и содержание бань»).

2. Дезинфекция или дезинфекция, совмещенная с мойкой, поверхностей (полов, стен, дверей), оборудования (скамеек, кранов и т.п.), инвентаря (тазов, ковшей и др., изготовленных из любых материалов) в мыльных, парильных, душевых и ваннных залах проводится методом протирания или орошения с использованием щеток, губок, салфеток, ветоши, смоченных 1% раствором средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при экспозиции 120 минут, 2% раствором средства при экспозиции 90 минут, 2,5% раствором средства при экспозиции 60 минут, 3% раствором средства при экспозиции 30 минут. Норма расхода средства 100мл/м². После окончания экспозиционной выдержки необходимо смыть дезинфицирующий раствор с полов, стен, дверей, скамеек, кранов водой с помощью шланга. Тазы также необходимо обмыть водой.

3. Дезинфекция или дезинфекция, совмещенная с мойкой, поверхностей (полов, стен, дверей), мебели (диванов, скамеек, кресел, шкафчиков, лежаков, столов и др.) и оборудования (массажных кресел, тренажерного оборудования) в релаксационных и раздевальных залах проводится методом протирания 1% раствором средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при экспозиции 120 минут, 2% раствором средства при экспозиции 90 минут, 2,5% раствором средства при экспозиции 60 минут, 3% раствором средства при экспозиции 30 минут. Смывание раствора с поверхностей, не контактирующих непосредственно с кожными покровами человека, не требуется.

4. Дезинфекцию и мойку, совмещенную с дезинфекцией, весов, ванн для ног, душевых кабин, ванн, проводят после каждого клиента 1%, 2%, 2,5%, 3% раствором средства «АБСОЛЮЦИД лайт», нанесенным на губку, салфетку, ветошь или щетку. Экспозиция 120 минут, 90 минут, 60 минут или 30 минут соответственно.

Срок годности рабочих растворов – 50 суток.

5. Банные сандалии и тапочки из полимерных материалов дезинфицируют способом погружения в 4% растворе средства на 90 минут, 5% растворе средства на 60 минут, 6% растворе средства на 30 минут, препятствуя их всплытию. После дезинфекции их ополаскивают водой.

6. Уборочный инвентарь погружают в раствор средства, материал (губки, салфетки, ветошь) замачивают в 4% растворе средства на 90 минут, 5% растворе средства на 60 минут. По окончании дезинфекционной выдержки прополаскивают водой.

7. Дезинфекция и мойка поверхностей помещений и оборудования при проведении генеральных уборок на объектах банного обслуживания проводится 1% раствором средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при экспозиции 120 минут, 2% раствором средства при экспозиции 90 минут, 2,5% раствором средства при экспозиции 60 минут, 3% раствором средства при экспозиции 30 минут.

8. Поверхности, пораженные плесенью, предварительно очищают и просушивают, а затем двукратно с интервалом 15 минут обрабатывают способом протирания или орошения 4% раствором средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при экспозиции 120 минут, 6% раствором при экспозиции 90 минут, 8% раствором при экспозиции 30 минут. Для предотвращения роста плесени через 1 месяц рекомендуется повторить обработку.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Дезинфекция в спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждениях, фитнес-клубах

1. Дезинфекция в физкультурно-оздоровительных, спортивных учреждениях и фитнес-клубах проводится в соответствии с нормативными документами, регулирующими их деятельность (ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования»).
2. Дезинфекция или дезинфекция, совмещенная с мойкой, поверхностей (полов, стен, дверей), мебели (диванов, скамеек, кресел, шкафчиков), спортивного оборудования (тренажерного оборудования), спортивного инвентаря, гимнастических коврик в тренажерных, гимнастических, фитнес-залах и раздевалных залах проводится методом протирания или орошения 0,2% раствором средства при экспозиции 60 минут, 0,3% раствором средства при экспозиции 30 минут, 0,5% раствором средства при экспозиции 15 минут. Смывание раствора с поверхностей, не контактирующих непосредственно с кожными покровами человека, не требуется.
3. Дезинфекция помещений и оборудования СПА-зоны (включая салоны красоты, парикмахерские, косметические и массажные кабинеты), проводится в соответствии с методикой, изложенной в Приложении 4. Дезинфекция помещений и оборудования Аква-зоны (зоны бассейнов), проводится в соответствии с методикой, изложенной в Приложении 5.
5. Дезинфекция бань и саун, проводится в соответствии с методикой Приложения 6.
6. Дезинфекция и мойка поверхностей помещений, оборудования, инструментария и инвентаря при проведении генеральных уборок в тренажерных, гимнастических, раздевалных, фитнес-залах, СПА-зонах проводится 0,2% раствором средства при экспозиции 60 минут, 0,3% раствором средства при экспозиции 30 минут, 0,5% раствором средства при экспозиции 15 минут; в аква-зоне, в банях и саунах – 1% раствором средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при экспозиции 120 минут, 2% раствором средства при экспозиции 90 минут, 2,5% раствором средства при экспозиции 60 минут, 3% раствором средства при экспозиции 30 минут.
7. Туалеты по мере необходимости и после окончания работы спортивного учреждения тщательно очищают, промывают и дезинфицируют способом орошения 0,2%, 0,3%, 0,5% раствором средства.
8. Ежедневную профилактическую дезинфекцию или дезинфекцию, совмещенную с мойкой душевых, проводят способом протирания или орошения 0,2% раствором средства при экспозиции 60 минут, 0,3% раствором средства при экспозиции 30 минут, 0,5% раствором средства при экспозиции 15 минут. Норма расхода средства 100мл/м².
Смывание раствора с поверхностей после каждой обработки не требуется.
9. Инвентарь, используемый для уборки в тренажерных, гимнастических, раздевалных, фитнес-залах, СПА-зонах, погружают в раствор средства, материал (губки, салфетки, ветошь) замачивают в 1,0% растворе средства на 60 минут, 1,5% раствор на 30 минут, в 2,0% растворе средства на 15 минут. Инвентарь для уборки аква-зоны, бань и саун обрабатывают 4% растворе средства на 90 минут, 5% растворе средства на 60 минут. По окончании дезинфекционной выдержки прополаскивают водой и высушивают.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха

1. Дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха проводится под руководством инженера по вентиляции только при выключенных системах вентиляции и кондиционирования. Профилактическую дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования воздуха проводят 1 раз в квартал в соответствии с требованиями, изложенными в СП 3.5.1378-03 «Санитарноэпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности». Текущую и заключительную дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха проводят по эпидпоказаниям.
2. Очистка систем вентиляции и кондиционирования воздуха может быть произведена сухим или влажным способом, в зависимости от загрязняющего воздух агента (пыль, органические, неорганические вещества и др.).
3. Очистка внутренней поверхности воздуховодов производится без применения воды и концентрированных кислотных и щелочных растворов. Допускается применять химические чистящие средства, воду и пар лишь в случае проведения очистки воздуховодов кухонных вытяжных систем с полной разборкой, либо после предварительного проведения герметизации очищаемых воздуховодов.
4. Производить очистку и дезинфекцию систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздуховодов допускается как вручную, так и с использованием механизированных средств, снижающих трудоёмкость работ.
5. После очистки и дезинфекции перед пуском систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздуховодов в эксплуатацию, поверхности воздуховодов и оборудования должны быть сухими.
6. Воздухозаборные и воздухораспределительные компоненты систем вентиляции и кондиционирования воздуха (решетки, диффузоры, сопла, насадки, сетки и т.д.) для проведения очистки и дезинфекции кондиционирования должны быть демонтированы. Мойка и дезинфекция проводится методом протирания,

орошения или погружения 0,2% раствором средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при экспозиции 60 минут, 0,3% раствором при экспозиции 30 минут, 0,5 % раствором средства при экспозиции 15 минут.

7. Очистку и дезинфекцию регулирующих устройств (дроссель-клапанов, шиберов, заслонок и т.д.) рекомендуется выполнять без демонтажа, через инспекционные двери. Регулирующие устройства очищаются и дезинфицируются с обеих сторон 0,2% раствором средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при экспозиции 60 минут, 0,3% раствором при экспозиции 30 минут, 0,5% раствором средства при экспозиции 15 минут.

При невозможности осуществления очистки и дезинфекции фильтров (в случае обнаружения характерных нарушений, например неравномерности пылевого загрязнения, намокания, утечки, и др.), воздушный фильтр соответствующей ступени должен быть заменен.

8. Для очистки и дезинфекции осевых и радиальных вентиляторов рекомендуется демонтировать мягкие вставки с целью обеспечения доступа к внутренней поверхности и рабочему колесу. При отсутствии мягких вставок демонтируются участки воздухопроводов. Внутренние поверхности рабочего колеса обрабатываются 0,2% раствором средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при экспозиции 60 минут, 0,3% раствором при экспозиции 30 минут, 0,5% раствором средства при экспозиции 15 минут.

При размере рабочего колеса радиального вентилятора более 400 мм, вентиляторы должны иметь легкоснимаемую инспекционную дверь. Для обработки круглых канальных вентиляторов следует производить их демонтаж и обработку 0,2% раствором средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при экспозиции 60 минут, 0,3% раствором при экспозиции 30 минут, 0,5% раствором средства при экспозиции 15 минут.

9. Очистку и дезинфекцию прямоугольных канальных вентиляторов рекомендуется проводить при открытой сервисной крышке, на которой установлен электродвигатель и рабочее колесо, способом протирания 0,2% раствором средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при экспозиции 60 минут, 0,3% раствором при экспозиции 30 минут, 0,5 % раствором средства при экспозиции 15 минут.

Обработку прямоугольных трубчатых и пластинчатых шумоглушителей следует выполнять через инспекционные двери также протирания 0,2% раствором средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при экспозиции 60 минут, 0,3% раствором при экспозиции 30 минут, 0,5 % раствором средства при экспозиции 15 минут.

При загрязнении пластинчатых шумоглушителей жировыми или другими отложениями с высокой адгезией, рекомендуется осуществлять замену звукопоглощающих пластин. В аналогичных случаях с трубчатыми шумоглушителями, необходима их замена.

10. Дезинфекцию пластинчатых теплообменников (нагревателей, охладителей, осушителей и др.) следует выполнять с учетом их конструкции. В случаях высокой степени загрязнения необходимо сначала очистить их с использованием специальных кислотных чистящих средств, а затем дезинфицировать способом протирания 0,2% раствором средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при экспозиции 60 минут, 0,3% раствором при экспозиции 30 минут, 0,5% раствором средства при экспозиции 15 минут.

Дезинфекция методом орошения теплообменников допускается только при их демонтаже или же проведении ряда мероприятий, исключающих попадание водных растворов на другие компоненты системы.

Установка теплообменников в систему вентиляции и кондиционирования после очистки и дезинфекции, допускается только в сухом состоянии.

Дренажные лотки теплообменников для очистки и дезинфекции следует демонтировать. Их моют и дезинфицируют методом протирания, орошения или замачивания в протирания 0,2% раствором средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при экспозиции 60 минут, 0,3% раствором при экспозиции 30 минут, 0,5% раствором средства при экспозиции 15 минут.

Дренажные трубопроводы должны очищаться от ила и других отложений. Допускается использование для промывки дренажной системы чистящих препаратов.

11. Очистка и дезинфекция внутренней поверхности корпусов центральных кондиционеров и камер смешения, внутренней поверхности секций центральных кондиционеров осуществляется через сервисные двери способом протирания 0,2% раствором средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при экспозиции 60 минут, 0,3% раствором при экспозиции 30 минут, 0,5% раствором средства при экспозиции 15 минут. Для аналогичной обработки местных кондиционеров необходимо произвести разборку агрегата согласно инструкции по их ремонту и также их обработать методом протирания 0,2% раствором средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при экспозиции 60 минут, 0,3% раствором при экспозиции 30 минут, 0,5 % раствором средства при экспозиции 15 минут.

12. Очистка и дезинфекция охлаждаемых потолков, увлажнителей и градилен должна производиться согласно инструкции производителя по эксплуатации и техническому обслуживанию. Их обработка также проводится способом протирания 0,2% раствором средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при экспозиции 60 минут, 0,3% раствором при экспозиции 30 минут, 0,5 % раствором средства при экспозиции 15 минут.

13. После очистки и дезинфекции воздухопроводов и фильтров проводится очистка и дезинфекция воздухоприемника, воздухораспределителей или насадок. Демонтируемые части оборудования дезинфицируются методом протирания, орошения или погружения, а неразборные системы – способом протирания 0,2% раствором средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при экспозиции 60 минут, 0,3% раствором при экспозиции 30 минут, 0,5 % раствором средства при экспозиции 15 минут.

14. Очистка и дезинфекция внутреннего испарительного блока бытовых кондиционеров проводится в следующей последовательности: снимается верхняя крышка (панель), извлекается фильтр (воздушный,

угольный). Воздушный фильтр либо заменяется, либо промывается и дезинфицируется способом погружения или орошения. Угольный фильтр подлежит замене (утилизации). Затем проводится очистка и дезинфекция радиаторной решетки кондиционера и накопителя конденсата способом протирания 0,2% раствором средства «АБСОЛЮЦИД лайт» при экспозиции 60 минут, 0,3% раствором при экспозиции 30 минут, 0,5% раствором средства при экспозиции 15 минут.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Дезинфекция, мойка и дезодорирование систем мусороудаления жилых, административных и общественных зданий

1. Перед дезинфекцией мусоропровода на всех этажах закрывают мусороприемные клапаны; на них размещается табличка с предупреждающей надписью о проведении очистки, мойки, дезинфекции и временном запрете на пользование мусоропроводом.

2. После этого из ствола мусоропровода, мусороприемной камеры удаляют остатки мусора и осуществляют прочистку ствола мусоропровода путем опускания и подъема щеточного узла с грузом – не менее 3-х циклов. Данная операция осуществляется без подачи воды и рабочего раствора дезинфицирующего средства в ствол мусоропровода.

3. Далее осуществляют мойку мусоропровода, производя опускание и подъем щеточного узла с непрерывной подачей горячей воды на внутреннюю поверхность ствола мусоропровода посредством кольцевого душа. Необходимо проводить не менее 4-х циклов мойки ствола мусоропровода.

4. Дезинфекция ствола мусоропровода проводится после его очистки и мойки путем подачи рабочего раствора средства на внутреннюю поверхность ствола с одновременным опусканием (подъемом) щеточного узла. При проведении орошения 0,2% раствором средства при экспозиции 60 минут, 0,3% раствором средства при экспозиции 30 минут, 0,5% раствором средства при экспозиции 15 минут. Норма расхода средства составляет 150мл/м², начальная температура рабочего раствора – 30-50°C, в дальнейшем температура рабочего раствора не поддерживается. Выполняется не менее 2-х циклов.

5. Приготовление рабочего раствора дезинфицирующего средства должно осуществляться специальным устройством, входящим в состав механизма прочистки, промывки и дезинфекции.

6. По окончании времени воздействия дезинфицирующего средства на ствол мусоропровода он просушивается с помощью естественной или принудительной вентиляции (после завершения процесса ствол мусоропровода должен быть сухим).

7. После очистки, мойки и дезинфекции ствола мусоропроводов приступают к очистке, мойке и дезинфекции мусороприемной камеры, загрузочных клапанов, тележек для вывоза мусора, мусоросборников (контейнеров) и площадок на которых они установлены. Обеззараживание мусороприемной камеры, загрузочных клапанов, мусоросборников (контейнеров) и площадок, на которых они установлены, включает в себя:

- орошение рабочим раствором дезинфицирующего средства стен, пола ишибера в мусоросборной камере;
- обработку (после их предварительной очистки от загрязнений) внутренней и наружной поверхностей загрузочного клапана, мусоросборников (контейнеров);
- орошение поверхностей площадок, на которых установлены мусоросборники (контейнеры), и их ограждений.

Дезинфекция указанных элементов системы мусороудаления осуществляется 1% раствором средства экспозиция составляет 60 минут, 1,5% раствором средства экспозиция составляет 30 минут, 2% раствором средства экспозиция составляет 15 минут способом орошения. Норма расхода средства составляет 150мл/м².

8. Дезинфекция металлических мусоросборников (контейнеров) в летний период осуществляется раз в 10 дней – при «несменяемой» системе вывоза, и после каждого опорожнения контейнера - при «сменяемой» системе вывоза твердых бытовых отходов.

9. Уборочный инвентарь (щетки, метлы, швабры и т.д.) по окончании работы погружают в раствор средства, материал (ветошь) замачивают в 1% растворе средства на 60 минут, в 1,5% растворе средства на 30 минут. По окончании дезинфекционной выдержки прополаскивают водой.